

취급설명서

한국에서만 사용 가능.

상기의 국가 이외에서 구매하신 고객은 반드시 구매 국가의 실경이 반영된 설명서를 참조하십시오.
www.elecom.co.jp/global/download-list/

겔패드 PH01은 HCM-PH01 시리즈용 겔패드입니다.
이 상품은 저주파 전류 및 온열을 신체에 전달하기 위해 장착하는 것입니다.
사용 전에 반드시 PH01의 취급설명서를 잘 읽고 올바르게 사용하십시오.
의료기기 아님. 본 제품은 질병의 유무를 판단 할 수 없음.

안전상의 주의(반드시 준수하십시오.)

사용하는 사람이나 타인에 대한 위해, 재산에 대한 손해를 미연에 방지하기 위해 반드시 지켜야 하는 점을 다음과 같이 설명합니다.

■ 표시 내용을 무시하고 잘못된 방법으로 사용했을 때 발생하는 손해의 정도를 다음 표시로 구분하여 설명합니다.

경고 '사망 또는 중상 등을 입을 가능성이 있는' 내용입니다.	주의 '상해를 입을 가능성 또는 물적 손상만 발생할 가능성이 있는' 내용입니다.
---	---

해서는 안 되는 '금지' 내용입니다.	반드시 실행해야 하는 '필수' 내용입니다.
----------------------	-------------------------


경고	
겔패드에 시계나 목걸이 등 금속이 닿은 상태로 사용하지 마십시오. 사고나 부상의 원인이 됩니다.	
겔패드 표면에 흙이 있거나 망가진 상태로 사용하지 마십시오. 사고나 트러블, 고장의 원인이 됩니다.	
본체와 겔패드를 연결·분리할 때, 겔패드를 붙이거나 위치를 바꿔 붙이거나 떼 때는 반드시 전원을 끄고 실시하십시오. 감전·고장의 원인이 됩니다.	
본체나 수리, 개조하지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니다.	
본 제품은 1인용입니다. 여러 사람에게 동시에 사용하지 마십시오. 사고·고장의 원인이 됩니다.	

주의

아래와 같은 곳에서는 사용하지거나 보관하지 마십시오. ·직사광선에 노출된 곳·난방 기구 옆 등 온도가 높은 곳 ·욕실 등 습기가 많은 장소·물기가 많은 곳·진동이 많은 곳 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.
겔패드를 장시간 피부에 붙인 채로 있지 마십시오. 피부 염증 등의 원인이 됩니다.
겔패드가 물에 젖은 상태로 사용하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
겔패드를 2장 겹친 상태로 사용하지 마십시오. 감전·사고의 원인이 됩니다.
기기에 하중이 가해지는 자세 및 무리한 자세로 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
본체와 겔패드는 올바르게 확실히 연결되어 있는지 확인한 후 사용하십시오.
본 제품의 사용에 의해 강한 자극이나 피부에 습진, 발적, 가려움 등의 이상을 느꼈을 때는 즉시 사용을 중지하고 의사에게 상담하십시오. 사고나 컨디션 불량 등의 원인이 됩니다.
젖은 손으로 겔패드를 만지지 마십시오. 감전이나 고장·사고의 원인이 됩니다.
유아의 손이 닿는 곳에 두거나 보관하지 마십시오. 만일 본체를 유아가 삼켰을 때는 즉시 의사에게 상담하십시오. 사고의 원인이 됩니다.
본 제품을 폐기할 때는 거주하는 지역의 규정에 따르십시오. 폐기할 때는 분해하지 마십시오.


패키지 내용 확인

제품에 대한 안내는 판매점에 문의하십시오.

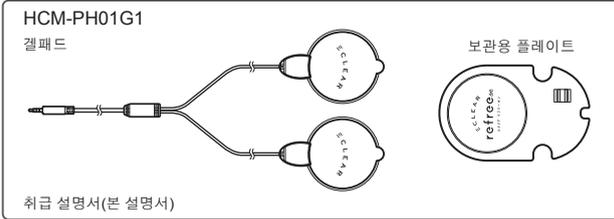


겔패드의 교환 방법

- ① 본체의 LED 램프가 모두 꺼지고 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
- ② 겔패드의 플러그를 본체에서 분리합니다.

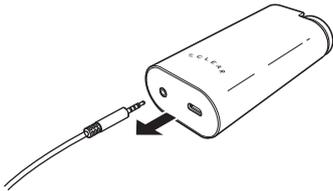

- ③ 겔패드를 봉투에서 꺼냅니다.
(겔패드에 붙어 있는 보호 필름은 아직 벗기지 마십시오.)

- ④ 겔패드의 플러그를 본체의 연결 단자에 단단히 연결합니다.

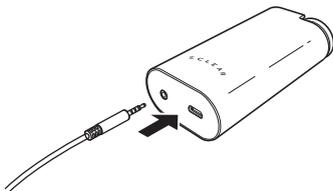

플러그를 잡고 끝까지 단단히 꽂으십시오.

취급·손질에 대해서

■ 겔패드 취급에 대해서

- 겔패드의 접촉면을 만지지 마십시오.
- 겔패드는 구부리지 마십시오.

■ 겔패드 손질하기

본체에서 겔패드를 분리한 상태로 손질하십시오.

아래 경우에 겔패드를 손질하십시오.

- 겔패드가 잘 안 붙게 된 경우
- 사용 시의 자극이 약해진 경우
- 사용 시에 찢릿찌릿한 자극이 느껴지는 경우
- 겔패드가 오염된 경우
- 겔패드가 보관용 플레이트에 붙지 않는 경우

손질해도 자극이 점점 약해지거나 찢릿찌릿한 느낌이 오는 경우는 겔패드를 교환하십시오.

- ① 물을 몇 방울 떨어뜨리고 손가락 지문 부위로 문질러서 들뜨는 오염을 닦기
 - ※ 물을 너무 많이 묻히지 마십시오. 점착력 저하나 점착면 손상의 원인이 됩니다.
 - ※ 손톱이나 브러시로 세게 문지르지 마십시오.
 - ※ 세제 등은 사용하지 마십시오.
 - ※ 플러그, 전극 코드나 손잡이 부분에 물이 묻지 않게 하십시오.



- ② 손잡이 부분을 잡고 충분히 물을 툰 후 손잡이 부분에 물이 닿지 않도록 패드를 아래쪽으로 하여 자연 건조시킵니다.
 - ※ 충분히 건조되지 않으면 점착력이 약해집니다.
 - ※ 휴지나 천 등으로 점착면을 닦지 마십시오.
 - ※ 직사광선을 피하십시오.

겔패드 부착 예

■저주파, 온열 또는 온열 저주파 코스 시

다음과 같은 부위에 붙이십시오.




다음과 같이 관절이 사이에 위치하게 하여 붙이십시오.




■온열 코스 시

온열 코스 시에는 저주파 또는 온열 저주파 코스 시의 부착 예 외에도 다음 부착 예를 참고하여 겔패드를 붙이십시오.


좌우 복부에 붙이기

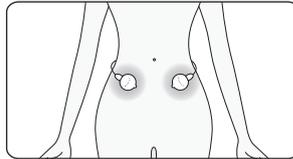


좌우 등에 붙이기

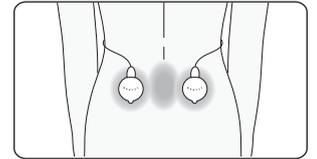

양쪽 발바닥에 붙이기

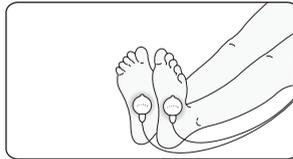

목덜미에 붙이기

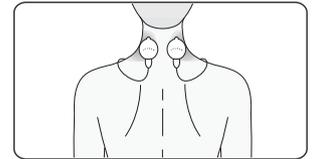

⚠ 주의:

- 저주파 코스 및 온열 저주파 코스 시의 경우에는 좌우 발바닥에 동시 사용하지거나 복부를 감싸듯 사용하지 마십시오.
- 겔패드를 2장 겹친 상태로 사용하지 마십시오.

보관 방법

본 제품은 다음 조건을 충족하는 환경에서 보관하십시오.

보관 온도: -10℃~60℃

보관 습도: 20~85%RH

■손질과 보관 시의 주의 사항

- 손질 시에는 벤젠이나 시너 등을 사용하지 마십시오.
- 아래와 같은 곳에는 보관하지 마십시오.
 - 직사광선에 노출된 곳
 - 고온, 다습, 물가, 먼지가 많은 곳
 - 진동이 많은 곳
 - 화학약품의 보관 장소나 부식성 가스가 발생하는 곳
- 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.



정격·사양

치수	패드부 치수: 약 ø 60mm 케이블 길이: 약 1100mm
무게	약 33g

상품 관련 문의처

엘레컴코리아 콜 센터
TEL.1588-9514 접수시간=10:00~17:00 ※점심 12:00~13:00 ※토요일, 일요일, 공휴일 휴무

교환·환불 안내

상품 구매 후에는 개봉 (BOX/포장) 을 하시면 교환 및 환불이 불가합니다.
단, 정상적인 사용 상태에서 불량이나 발생 시 공정거래위원회 소비자 분쟁 해결 기준에 의해 처리됩니다.

엘레컴코리아 주식회사

www.elecom.co.kr

- 본 설명서의 저작권은 엘레컴 주식회사가 보유합니다.
- 본 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단으로 복제/정제하는 것을 금지합니다.
- 본 제품의 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품의 사용에 따른 다른 기기의 고장이나 트러블에 관해서는 책임을 지지 않으므로 양해 바랍니다.
- 본 제품 중 전락 물자 또는 역무에 해당하는 것의 수출에는 외환법에 리거한 수출 또는 역무 거래 허가가 필요합니다.
- 본 설명서에 기재되어 있는 기타 회사명·제품명 등은 일반적으로 각 회사의 상표 또는 등록상표입니다.

Eclear refree on Gelpad
Manual, Safety precautions, and Compliance with regulations
1st edition, April 18, 2018

ELECOM

©2018 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.



인증번호: R-REM-EU-HCM-PH01

MSC-HCM-PH01G1-K_ver.111