

使用說明書

只適用於香港及菲律賓地區。

在上述國家以外購買的顧客請參照當地使用說明書。

本產品 ECLEAR Lean HCT-P01 系列專用凝膠墊。

本產品是通過傳遞電力刺激給身體的設備。

使用前，必需詳細閱讀 ECLEAR Lean P01 系列使用說明書，然後正確使用。

注意安全 (請必需遵守)

防患於未然，為免使用人士及其他人發生危險、財物損失，請務必按如下說明處理。

■若忽視安全守則，錯誤使用，導致危險、或損失的程度分別說明。

 警告 「預估可導致死亡、或身體嚴重受傷」的內容。	 注意 「預估可導致身體受傷、或財物損失」的內容。
 不可進行的「禁止」要求。	 必需執行的「強制」要求。

 警告	
 若非訓練，請勿使用。 可引起意外事故、或故障、失靈事宜。	
 請勿在以下部位使用。 • 心臟附近的位置，如胸部等、及頸項以上的部份，或頭部、或面部等 • 有粘膜組織的身體部位，如傷口、眼、口、陰部等 • 曾接受整形手術部位 • 曾植入金屬、塑膠、矽膠等的部位 • 脊柱、脊椎 • 有紋身部位 • 經期時腹部 • 戴上頸鍊、或手錶、裝飾環的部位	
 若凝膠墊表面有缺憾、破損等情況，請勿使用。 可引起意外事故、或故障、失靈事宜。	
 將凝膠墊接駁或拆離主機、貼上或更換或除下凝膠墊等情況時，必需先行關上電源才可進行。 可引起觸電、或失靈。	
 請勿分拆、或修理、改造。 可引起火警、或觸電。	
 本產品僅供一人使用。 不可供兩人或以上，同時使用。 可引起觸電、或意外事故。	

 注意	
 請勿在下述地方使用、存放。 • 陽光直接照射的地方 • 暖氣機附近等、高温度的地方 • 接近水氣，多塵的地方 • 經常晃動的地方 可引起火警、觸電、故障事故。	
 請勿長時間讓凝膠墊粘貼著皮膚。 可引起皮膚發炎。	
 請勿使用浸濕後的凝膠墊。 可引起觸電、或意外事故。	
 請勿將兩片凝膠墊疊起使用。 可引起觸電、或意外事故。	
 請勿採取增加機器負重及不合理姿勢。 可引起失靈。	
 每天一個部位，請勿使用超過 30 分鐘。 可引起意外事故、或身體不適。	
 同一時間，最多只可用於兩個部位。 可引起意外事故、或身體不適。	
 請確認主機及凝膠墊，已正常及牢固接駁後，才可使用。	
 若使用本產品引致身體感到強烈刺激、皮膚出現濕疹、發紅、痕癢等異常時況，請立即停止使用、並諮詢醫生意見。 可引起意外事故、或身體不適。	
 手濕時，請勿觸碰專用 USB 電源線、或凝膠墊。 可引起觸電、或失靈、意外事故。	
 請勿放置或存放於嬰孩能觸及的位置。 可引起意外事故。若嬰孩誤吞，請立即諮詢醫生意見。	
 棄置本產品時，請遵從政府規定。	

確認包裝內附物件

請向零售商查詢產品資訊。


雙墊 (2 片裝) 型號：HCT-P01G1  雙墊 (耗材) 保護貼 使用說明書 (本說明書)	芯墊 (1 片裝) 型號：HCT-P01G2  芯墊 (耗材) 保護貼 使用說明書 (本說明書)
---	---

凝膠墊更換方法

① 請確認已關上主機電源 (LED 燈已熄滅)。

② 從主機取出凝膠墊。


[芯墊的情況]

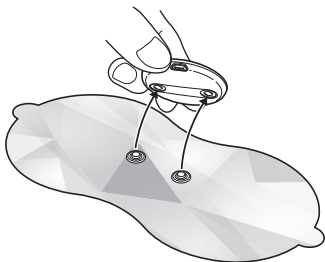

③ 從袋取出凝膠墊。

(暫時不用撕去凝膠墊保護膜。)

④ 接駁主機與凝膠墊，直至接駁口發出“卡擦”聲响。

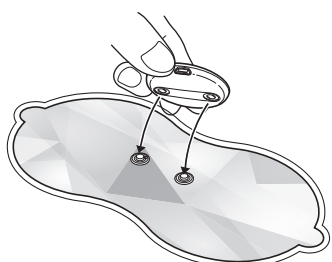

※請以相同方法更換雙墊。

關於處理、護理

■關於凝膠墊的處理

- 請勿觸摸凝膠墊粘貼面。
- 請勿屈曲凝膠墊。
- 不使用時，粘貼在保護貼兩邊。
- 請勿使用浸濕後的凝膠墊。
請瀝乾所有水份，自然風乾粘貼面後使用。
- 陽光沒有直接照射、濕度低的地方存放。

■凝膠墊護理 (護理準則：約每 30 次使用後，清理一次)

請清潔從主機取下的凝膠墊。


發生以下情況，請清理凝膠墊。

- 凝膠墊變得難以粘貼
- 使用時的刺激變弱
- 使用時感到刺痛
- 凝膠墊變得污穢
- 凝膠墊難以粘著保護貼

清潔後，刺激仍變弱、或感到刺痛，請更換凝膠墊。


① 沾少量清水，用手指尖輕力清洗數秒。

※請勿使用太多清水。粘力減少、或粘貼面有破損。

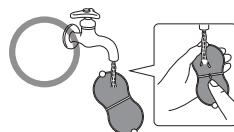

② 挾著小把手，瀝乾所有清水，自然風乾。


- ※未完全乾燥下，粘貼力變弱。
- ※請勿使用紙巾、或布料等拭擦粘貼面。
- ※避免受陽光直接照射。

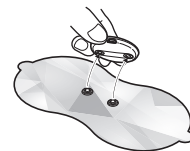


凝膠墊粘貼例子

前面

※請將凝膠墊直接粘貼到皮膚。

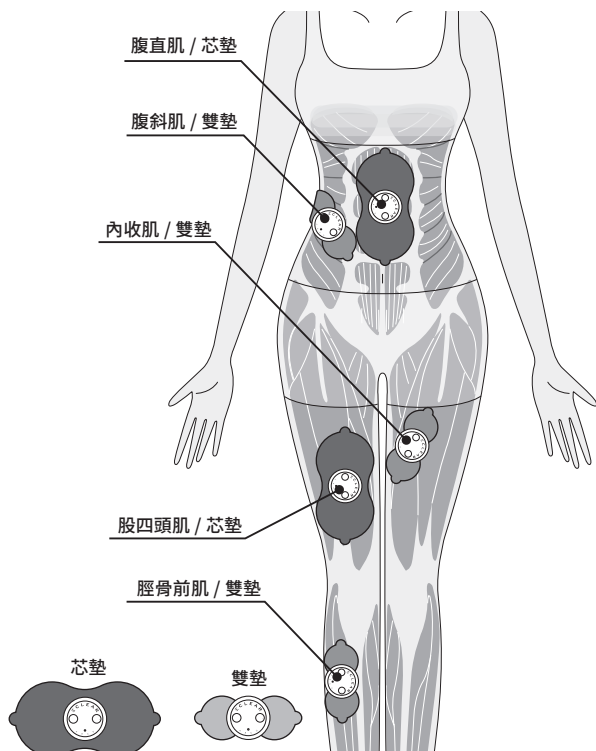

後面

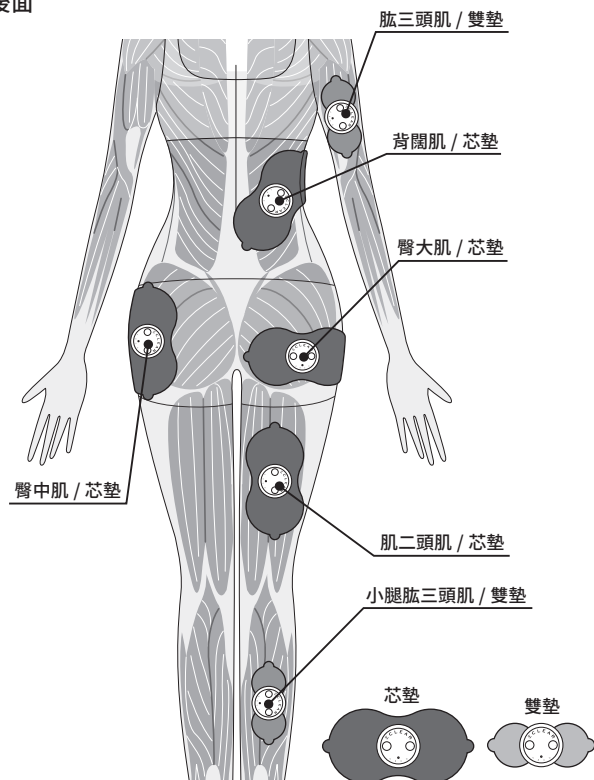

存放方法

請保存本產品在乎合以下所有條件的地方。

存放溫度：-10℃～60℃

存放濕度：相對濕度 20～85%

■護理及存放時，請注意

- 護理時，請勿使用揮發油、稀釋劑等。
- 請勿在下述地方存放。
 - 一 陽光直接照射的地方
 - 一 高溫、潮濕、接近水氣、多塵的地方
 - 一 經常晃動的地方
 - 一 化學藥品倉庫、或有腐蝕性氣體的地方
- 請放置在嬰孩觸碰不到的地方。



基本規格

呎吋	雙墊 (闊 × 高 × 深) 約 125 × 50 × 5 mm 芯墊 (闊 × 高 × 深) 約 175 × 85 × 5 mm
重量	雙墊 約 4.50g (2片裝) 芯墊 約 12.0g (1片裝) ※ 相當於一片的重量
使用時，溫度及濕度要求	0℃～40℃ 20～85%RH
存放時，溫度及濕度要求	-10℃～60℃ 20～85%RH

ELECOM CO., LTD.

www.elecom.co.jp/global/

ELECOM Korea Co., Ltd. 5F Suam Bldg. 1358-17, Seocho2-dong, Seocho-gu, Seoul 137-862, Korea TEL : +82 (0) 2 - 1588 - 9514 FAX : +82 (0) 2 - 3472 - 5533 www.elecom.co.kr	ELECOM Sales Hong Kong Ltd. 2/F, Block A, 2-8 Watson Road, Causeway Bay, Hong Kong TEL : +852 2806 - 3600 FAX : +852 2806 - 3300 email : info@elecom.asia
新宜麗客(上海)商貿有限公司 上海市徐匯區肇嘉浜路 1065 甲 1603H室 電話：+86 (0) 40 - 0867 - 3568 www.elecom.cn	ELECOM Singapore Pte. Ltd 33 UBI AVENUE 3 # 03-56. VERTEX SINGAPORE (408868) TEL : +65 6347 - 7747 FAX : +65 6753 - 1791

於日本境外地區購買之產品，如有任何問題，應聯絡購買國家/地區之當地經銷商。「ELECOM CO., LTD. (Japan)」恕不就日本境外國家/地區購買或使用之產品提供客戶支援服務。此外，亦不提供除非日文服務。將依據 Elecom 保養條款進行更換，惟不適用於日本境外地區。

Ec clear lean Gel pad
Manual, Safety precautions, and Compliance with regulations
1st edition, September 29, 2017

ELECOM

©2017 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

MSC-HCT-P01G-HK-PH_zhzhk_ver.111