


HCM-P01 시리즈

한국 외의 국가에서 구매하신 고객은 반드시 구매 국가의 설정이 반영된 설명서를 참조하십시오 www.elecom.co.jp/global/download-list/manual/

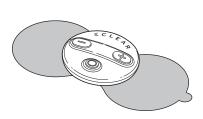

본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 설명서에서는 조작 방법과 안전하게 취급하기 위한 주의 사항을 기재하고 있습니다. 사용하기 전에 이 취급 설명서를 반드시 읽어 주십시오. 또한 본 설명서를 모두 읽은 후에는 잘 보관하십시오.

안전상의 주의(반드시 준수하십시오)

사용자 및 다른 사람에게 미칠 수 있는 위해 · 재산상의 손해를 미연에 방지하기 위해 반드시 지켜야 하는 사항을 다음과 같이 설명하고 있습니다.

■표시 내용을 무시하고 잘못 사용한 경우에 발생하는 위해 및 손해의 정도를 다음과 같은 표시로 구분하여 설명하고 있습니다.

⚠ 위험	이 표시가 있는 항목은 '사망 또는 중상을 입을 가능성이 높은 내용입니다.		
⚠ 경고	│표시가 있는 항목은 '사망 또는 중상 등을 입을 가능성이 ∥상되는' 내용입니다.		
⚠ 주의	이 표시가 있는 항목은 '상해를 입을 가능성 또는 물적 손해만 발생할 가능성이 예상되는' 내용입니다.		

- 이 그림 표시는 해서는 안 되는 '금지' 내용입니다.
- 이 그림 표시는 반드시 실행해야 하는 '강제' 내용입니다.

- 이래와 같은 의료용 기기와는 절대로 함께 사용하지 마십시오 • 심박 조율기 등의 체내 이식형 전자 기기
- 인공 심폐 등의 생명 유지용 의료용 전기 기기 • 심전계 등의 장착형 의료용 전자 기기
- 위와 같은 의료용 기기와 함께 사용시 오작동을 일으켜 전기 충격, 화상, 사망에 이를 수 있습니다.

⚠경고

- 심장 부근, 머리, 얼굴, 입안 및 음부, 피부 질환 부위 등에 사용하지
 - 사고 및 부상, 몸 상태 불량의 원인이 됩니다.
- 다른 용도로 사용하지 마십시오. 사고 및 문제 발생, 고장의 원인이 됩니다.
- ◯ │치료 기기와 동시에 사용하지 마십시오. 속이 메스꺼워지는 등 몸 상태 불량의 원인이 됩니다.

∄경고 아이가 사용하지 않도록 하고, 기기 본체 및 겔 패드 위에서 놀게 하거나

- 위에 올라가지 않도록 하십시오. 사고 및 부상의 원인이 됩니다.
- 길 패드에 시계 및 목걸이 등의 금속이 닿은 상태에서 사용하지 마십시오. 사고 및 부상의 원인이 됩니다.
- 길 패드의 표면이 뜯어져 있거나 손상되어 있는 상태에서 사용하지 마십시오. 사고 및 문제 발생, 고장의 원인이 됩니다.
- 본체와 겔 패드를 연결 · 분리할 때, 겔 패드를 부착 · 교체 · 떼어 낼 때는 반드시 전원을 끈 후에 실시하십시오. 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 다음과 같은 분은 의사와 상담한 후에 사용하십시오.
- 의사에게 치료를 받고 있는 분 또는 신체에 특히 이상을 느끼고 있는 분 • 악성 종양이 있는 분
- 심장 · 뇌 신경에 이상이 있는 분
- 임신한 분, 출산 직후인 분 • 체온 38°C 이상(유열기)인 분(※예1: 급성 발증 증상(권태감, 오한, 혈압 변동 등)이 강한 시기 ※예2: 쇠약해진 경우)
- 감염증 질환인 분 • 피부 지각 장애 또는 피부에 이상이 있는 분
- 척추의 골절, 염좌, 근육 파열 등 급성(동통성) 질환인 분
- 안정이 필요한 분
- 약을 복용 중인 분
- 혈압에 이상이 있는 분
- 사지가 불편한 분 • 스스로 의사 표시를 할 수 없는 분
- 당뇨병 등에 따른 고도의 말초 순환 장애로 지각 장애가 있는 분 • 저온 상태인 분
- 혈액 순환 장애가 있는 분

별매품 안내는 판매점에 문의하십시오.

다음과 같은 별매품이 마련되어 있습니다.

1 Point Pad (2매입)

- 얼마간 사용했는데 효과가 나타나지 않는 분 • 겔 패드가 피부에 맞지 않는 분
- 부상, 화상, 증상 악화 등을 초래할 수 있습니다.

● 분해 및 수리, 개조하지 마십시오. 분해금지 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

■별매품

판매명: 겔 패드 PO1

⚠경고

│ 본 제품은 1인용입니다. 여러 사람이 동시에 사용하지 마십시오. 감전 · 사고의 원인이 됩니다.

<u>↑</u>주의

- 이래의 장소에서는 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 직사광선이 닿는 곳
- 난방 기구 주변 등 온도가 높은 곳 •욕실 등 습기가 많은 곳
- •물기 주변
- 먼지가 많은 곳

각부의 명칭

- 진동이 많은 곳 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 취침 시에는 사용하지 마십시오. 사고 및 부상의 원인이 됩니다.
- 자동차 · 오토바이 · 자전거 등의 운전 직전 및 운전 시에는 사용하지 마십시오.
- 사고 및 문제 발생의 원인이 됩니다.
- 장시간 겔 패드를 피부에 붙인 상태로 두지 마십시오. 피부 염증 등의 원인이 됩니다.
- 길 패드가 물에 젖은 상태에서 사용하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 1부위당 15분 이상 사용하지 마십시오. 사고 및 몸 상태 불량의 원인이 됩니다.
- 겔 패드를 2장 겹친 상태에서 사용하지 마십시오. 감전 · 사고의 원인이 됩니다.
- ▲ 본체와 겔 패드는 올바르게 확실히 연결되어 있는 것을 확인한 후 사용하십시오.
- 각 조작 버튼이 정상적으로 작동하는 것을 확인한 후 사용하십시오.

<u> 주</u>의

- 처음 사용할 때나 장시간 사용하지 않은 기기를 사용할 때는 취급 설명서대로 조작하여 정상적으로 작동하는 것을 확인한 후 사용하십시오.
- ☑ 본 제품을 사용하여 강한 자극 및 피부에 습진, 발적, 가려움 등의 이상을 느꼈을 때는 즉시 사용을 중지하고 의사와 상담하십시오. 사고 및 몸 상태 불량의 원인이 됩니다.
- USB 커넥터 삽입구에 손이나 손가락 등 신체의 일부가 닿지 않도록 하십시오.
- 감전 · 장애 · 고장의 원인이 됩니다.
- USB 커넥터 삽입구에 금속류를 꽂지 마십시오. 발열 및 발화의 원인이 됩니다.
- 마십시오.
 - 케이블이 손상되거나 단선되어 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 사용하지 마십시오. 발화 및 감전의 원인이 됩니다.
- 여행용 컨버터 등의 변압기를 사용하여 충전하지 마십시오. 발열 및 발화의 원인이 됩니다.
- 시가 소켓 등을 사용하여 차량 내에서 충전하지 마십시오. 발화 및 발열, 감전의 원인이 됩니다.
- │ <mark>◇</mark> │ 젖은 손으로 전용 USB 케이블 및 겔 패드를 만지지 마십시오. ※ 삼리 감전 및 고장 사고의 원인이 됩니다.
- 함께 제공된 전용 USB 케이블은 본체의 충전 이외에는 사용하지 마십시오. 전용 USB 케이블은 통신 용도 및 그 밖의 기기 충전에는 사용할 수
- | 충전 시 전용 USB 케이블은 끝까지 확실히 삽입하십시오. 삽입이 불완전한 상태에서 충전하면 발화 및 감전의 원인이 됩니다.
- ♪ 3개월에 1번은 반드시 충전하십시오.

완전히 방전되면 충전할 수 없게 되는 경우가 있습니다.

유아의 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오

발열, 파열, 발화의 원인이 됩니다.

본체에 물이나 액체를 넣거나 본체를 적시지 마십시오.

▲ 본 제품을 폐기할 때는 거주하는 행정 기관의 지도에 따르십시오.

연락하십시오.

기기에 고장이 발생했을 때는 사용을 즉시 중지하고, 전원을 끄고 판매점에

사고의 원인이 됩니다. 만일 본체를 유아가 삼켰을 때는 즉시 의사와

본 제품에 대해

■사용 목적

피로를 느끼는 신체 부위에 붙인 전극을 통해 미약한 저주파류를 흘려 근육을 이완하는 마사지 기구입니다. (본 제품은 의료 기기가 아닙니다.) 일반 가정에서 사용하십시오.

■에클리어 리프리란

몸에 붙인 겔 패드를 통해 미약한 저주파류를 흘려 그 진동을 이용하여 피로를 느낀 신체 부위를 마사지하는 기구입니다.

■사용 시간의 기준

1부위당 약 15분이 사용 시간의 기준입니다. 15분 이상 계속하면 몸 상태 불량의 원인이 될 수 있습니다. 본 제품은 사용 시작부터 약 15분이 경과하면 자동으로 전원이 꺼지는 타이머가 내장되어 있습니다.

■효과적인 사용 시기

목욕 후 사용을 권장합니다

╭⚠ 주의: -


피부의 땀이나 수분을 잘 닦아낸 후 사용하십시오.

패키지 내용 확인

사용하기 전에 모든 구성품이 갖추어져 있는지 확인하십시오. 또한 포장에는 만전을 기하고 있습니다만, 만일 부족 부품, 파손품 등이 있으면 바로 구입한 판매점에 연락하십시오.

본체

겔 패드(2 Point Pad) (소모 부품)

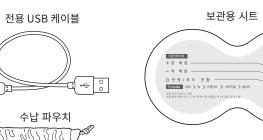

취급 설명서 본서










Wide Pad (1매입)

형번: HCM-P01G3-K

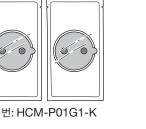


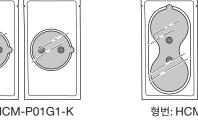




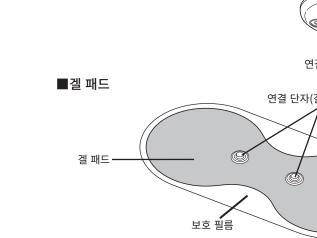



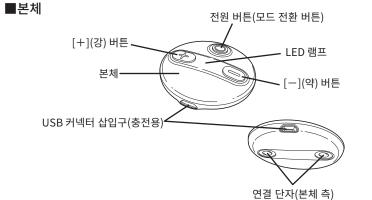


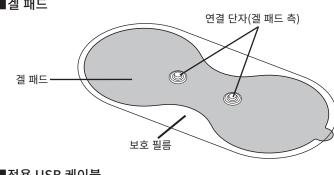

사용 시작(구입 직후 및 장시간 사용하지 않았을 때) 및 사용 중에 배터리 잔량이 없어졌을 때는 반드시 완전히 충전될 때까지 충전하십시오.

충전 시간: 약 3.5시간 (1) 전용 USB 케이블의 USB microB 커넥터를 본체의 USB 커넥터 삽입구에 연결하여 충전합니다. ※올바르게 연결되면 "삑" 소리가 나고, 본체의 LED 램프가 점멸 또는

충전 잔량이 80% 미만일 때는 적색으로 점멸, 80% 이상일 때는 녹색으로 점멸, 완전히 충전되었을 때는 녹색으로 점등됩니다.

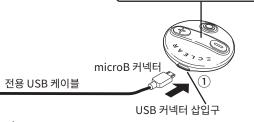

점등됩니다.

- ____ 여행용 컨버터 등의 변압기를 사용하여 충전하면 발열 및 발화의 우려가 있습니다.
- 충전 중에는 조작할 수 없습니다.
- 본체를 반복 충전하면 완전히 충전되었을 때 사용할 수 있는 시간이 조금씩 짧아집니다. 극도로 짧아지면 배터리의 수명이 다 된 것입니다. 배터리는 교환 불가합니다.

② 충전이 완료되면 "삐-" 소리가 납니다.

2 겔 패드를 본체에 장착하기

1) 처음 사용할 때는 겔 패드를 봉투에서 꺼냅니다. (겔 패드에 붙어 있는 보호 필름은 아직 벗기지 마십시오.)



② 본체의 전원을 끄고, LED 램프가 꺼져 있는 것을 확인합니다



③ 본체와 겔 패드의 연결 단자를 "딸깍"하는 소리가 날 때까지 연결합니다.



┌⚠ 주의: 겔 패드는 당사가 지정한 겔 패드를 반드시 사용하십시오.

① 본체를 겔 패드에서 분리합니다.

■겔 패드를 교환할 때는



② 겔 패드를 봉투에서 꺼냅니다. (겔 패드에 붙어 있는 보호 필름은 아직 벗기지 마십시오.)



- ③ 본체의 전원이 꺼져(LED 램프가 꺼져) 있는 것을 확인합니다.
- ④ 본체와 겔 패드의 연결 단자를 "딸깍"하는 소리가 날 때까지 연결합니다.



╭⚠ 주의: 겔 패드를 교환할 때는 겔 패드 취급 설명서도 함께 읽으십시오.

11 13

겔 패드 부착 예

어깨-승모근 팔 위쪽-상완근군 팔 아래쪽-전완 굴근군



※2번째 이후에는 보관용 시트에서 벗겨 사용하십시오.

겔 패드를 부착한다


겔 패드는 피부에 밀착시켜 붙이십시오. ※겔 패드가 피부에서 떨어지면 본체의 전원이 자동으로 꺼집니다.


겔 패드를 목걸이 등의 금속 위에 붙이지 마십시오.

■겔 패드 취급에 대해


- 겔 패드의 부착면은 만지지 마십시오. 접착력이 약해졌을 때는 '겔 패드 손질'을 참조하십시오.
- 겔 패드는 구부리지 마십시오.



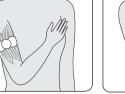

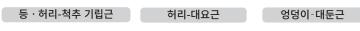



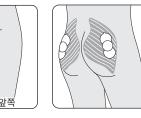





■리튬 이온 배터리 재활용에 대한 안내



폐기 방법

본 제품은 리튬 이온 배터리를 내장하고 있습니다. 리튬 이온 배터리는 재활용할 수 있는 소중한 자원이므로 재활용에 협력을 부탁드립니다. 본 제품을 폐기할 때는 거주하는 행정 기관의 지도에 따르십시오.

· 폐기할 때는 배터리를 분해하지 마십시오.

· 본 제품은 일반 가정 쓰레기로 폐기하지 마십시오. 폐기된 리튬 이온 배터리가 쓰레기 수거 차량 등에서 파괴되고 단락되어 발화, 발열의 원인이 됩니다.

■리튬 이온 배터리 분리 방법

제품을 폐기할 때 이외에는 절대로 분해하지 마십시오.



아래의 순서는 제품을 폐기하기 위한 것으로 수리용이 아닙니다. 분해한 경우에는 복구할 수 없습니다.


●충전 잔량이 있는 경우에는 배터리를 완전히 사용하십시오.

●드라이버를 사용하여 다음 순서대로 분해하십시오. 1 본체 전원 버튼 바로 아래 부근의 홈에 일자

드라이버를 끼워서 연다 ② 기판을 고정하고 있는 나사를 분리한다

③ 기판 안쪽에 있는 배터리의 코드를 니퍼로 마이너스의 검은색 코드부터 자른다.

4 배터리를 분리한다

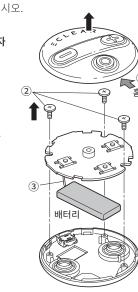

●분리한 배터리는 (+)와 (-)의 단자가 단락되지 않도록 주의하고, 단자부에 테이프를 붙여 절연하십시오.

사용 방법

1 전원을 켠다 전원 버튼을 약 2초 동안 길게 누르면 "삐-" 소리가 나면서 전원이 켜지고 동작을 시작합니다. LED 램프가 녹색으로 점등됩니다.

모드를 전환한다

이런 경우에는

이런 경우

전원이 들어오지 않는다

사용 중에 전원이 꺼진다

겔 패드가 피부에 붙여지지

자극을 느끼지 않는다/


피부가 붉어진다. 피부가 따끔거린다

전원이 바로 꺼진다

충전할 수 없다

사용 중에 전원 버튼을 누르면 모드를 전환할 수 있습니다. ※전원을 켰을 때는 항상 '임의' 모드에서 시작합니다.

· 전원 버튼을 누를 때마다 "삑" 소리가 나고, 아래와 같이 전환됩니다. '임의' 모드로 되돌리면 "삐-" 소리가 납니다.

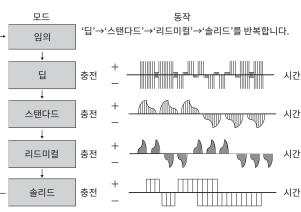

원 인

배터리의 충전이 불충분하거나 충전이 꺼져 있다

배터리의 충전이 불충분하거나 충전이 꺼져 있다

▶ 길 패드와 피부가 올바르게 밀착되어 있지 않다

▶ | 겔 패드 접착면의 투명한 보호 필름을 벗기지 않았다

장기간 보관하여 배터리가 완전히 방전되었다

본체와 겔 패드의 연결이 불충분

겔 패드의 접착면이 더러워져 있다

▶ 켈 패드의 접착면이 손상되어 있다

겔 패드가 피부에 밀착되어 있지 않다

겔 패드의 접착면이 더러워져 있다

겔 패드를 올바르게 연결하지 않았다

겔 패드가 피부에 밀착되어 있지 않다 ▶ | 겔 패드가 더러워져 있거나 마른 상태이다

▶ 겔 패드의 접착면이 손상되어 있다

충전이 불충분하거나 배터리가 소모되었다

겔 패드의 접착면이 더러워져 있다, 손상되어 있다

물 세척 직후에 사용했다

겔 패드를 겹쳐서 붙였다

강도 조절이 약해져 있다

사용 시간이 너무 길다


집 패드가 피부에 부착되지 않는다 ▶ 집 패드의 접착면에 땀이나 수분이 많이 묻었다

배터리 충전 중

3 강도를 조정한다

10단계의 레벨 중에서 원하는 강도를 선택합니다. ※처음에 전원을 켰을 때 또는 모드를 변경했을 때의 강도는 레벨

- [+](강) 버튼을 누르면 "삑" 소리가 나면서 강도가 1단계 오릅니다.
- [-](약) 버튼을 누르면 "삐빅" 소리가 나면서 강도가 1단계 내려갑니다.
- 레벨 "10"에서 [+] (강) 버튼, 레벨 "1"에서 [-] (약) 버튼을 누른 경우에는 "삐비빅" 소리가 나고 레벨은 변경되지 않습니다.

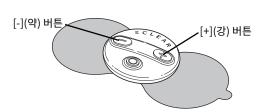

4. 전원을 끈다

전원을 끄고 충전하십시오. ➡P.11

전원을 끄고 충전하십시오.➡P.11

피부에 밀착시키십시오.➡P.14

강도를 조절하십시오. ➡P.17

피부에 밀착시키십시오. ➡P.14

충전하십시오.➡P.11

결치지 않도록 붙이십시오.➡P.14

전원을 끄고 피부에 밀착시키십시오. ➡P.14

전착면의 투명한 보호 필름을 벗기십시오.➡P.14

딸깍 소리가 나도록 올바르게 연결하십시오. ➡P.12

사용 시작 후 약 15분이 경과하면 "삐-" 소리가 나면서 자동으로 전원이

- ※사용 중에 전원을 끄려면 전원 버튼, [+](강) 버튼, [-](약) 버튼 중 하나의 버튼을 약 2초 동안 길게 누릅니다
- ※겔 패드가 피부에서 떼어지거나 겔 패드에서 본체를 분리한 경우에도 전원이 꺼집니다.

대처 방법

사용할 수 없습니다. 완전히 방전되지 않도록 3개월에 1번 충전하십시오.▶P.21 • P.22

■ 겔 패드는 소모 부품입니다. 접착면이 손상되었을 때는 사용을 중지하고 별매품을 구입하십시오. ➡ P.9

켈 패드는 소모 부품입니다. 접착면이 손상되었을 때는 사용을 중지하고 별매품을 구입하십시오. ▶P.9

켈 패드는 소모 부품입니다. 접착면이 손상되었을 때는 사용을 중지하고 별매품을 구입하십시오. ➡P.9

☑ 패드는 소모 부품입니다. 접착면이 손상되었을 때는 사용을 중지하고 별매품을 구입하십시오. ▶P.9

▶ 1부위당 15분 이내에 사용하고, 사용 후에는 겔 패드를 피부에서 떼어 내십시오. ▶P.18

소량의 흐르는 물을 묻히면서 손가락 끝으로 가볍게 몇 초간 씻으십시오. ➡P.19


소량의 흐르는 물을 묻히면서 손가락 끝으로 가볍게 몇 초간 씻으십시오.➡P.19

소량의 흐르는 물을 묻히면서 손가락 끝으로 가볍게 몇 초간 씻으십시오. ▶P.19

빠터리 충전이 완료된 후 전용 USB 케이블을 뽑고 사용하십시오. ▶ P.11

전원을 끄고 본체와 겔 패드를 다시 연결하십시오.➡P.12 · P.13

충분히 물기를 제거한 후 접착면을 자연 건조시키십시오.**▶**P.19

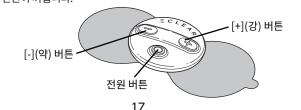

╭॒⚠ 주의:

제품 사양

5 수납

1) 겔 패드를 피부에서 떼어 냅니다.

겔 패드 접착면을 만지지 말고

손잡이를 2개 모두 잡고 떼어

② 본체와 겔 패드는 분리하지 말고 보관용 시트에 붙입니다.

③ 함께 제공된 수납 파우치에 넣어 보관합니다.

※2개가 들어 있는 경우에는 보관용 시트 양면에 붙이십시오.

온도 및 습도가 높은 곳이나 직사광선이 닿는 곳에 두지 마십시오

손잡이를 잡고 떼어 냅니다.

※Wide Pad인 경우는

내십시오.

전원 전압	DC 5.0 V 土 5%(리튬 이온 배터리)		
내장 배터리	40mAh ※ 1		
반복 충전 횟수	약 500 회		
충전 시간	약 3.5 시간 ※ 2		
동작 시간	약 150 분 (완충전 시) ※ 3		
최대 출력 전류	약 10mA 이하		
정격 출력 전압	약 32V		
기본 주파수	약 2~550Hz		
출력 펄스 폭	약 200µS		
소비 전력	약 0.2W		
타이머	약 15 분		
본체 치수 약 φ 44mm x D11mm 케이블 길이 약 200mm			
		본체 질량	약 13g
사용 환경 온습도	0° C~40° C 20~85% RH		
보관 환경 온습도	-10° C~60° C 20~85% RH		

- ※1 과충전, 과방전, 과전압 보호 기능 탑재
- ※2 다 사용한 배터리를 완전히 충전할 경우의 기준 ※3 동작 내용, 사용 환경에 따라 변화합니다.

세척 방법

본체에서 겔 패드를 분리한 상태에서 세척하십시오.


■겔 패드 세척 (손질 기준: 30회 정도 사용할 때마다 1회)

아래의 경우에 겔 패드를 세척하십시오.

- 겔 패드의 접착력이 약해졌을 때
- 사용 시의 자극이 약해졌을 때
- 사용 시에 따끔거리는 자극을 느낄 때
- 겔 패드가 더러워졌을 때
- 겔 패드가 보관용 시트에 붙여지지 않을 때

세척해도 자극이 약해졌거나 따끔거리는 느낌이 있을 경우에는 겔 패드를 교환하십시오.

1 소량의 물을 뿌리면서 손가락 끝으로 가볍게 몇 초간 세척합니다. ※물을 많이 뿌리지 마십시오. 접착력의 저하 및 접착면 손상의 원인이 됩니다.

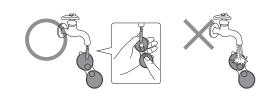

② 손잡이를 잡고 충분히 물기를 제거한 후 자연 건조시킵니다.

※충분히 건조시키지 않은 경우, 접착력이 약해집니다 ※티슈 및 천 등으로 접착면을 닦지 마십시오. ※직사광선은 피하십시오.

• 본체의 더러운 부분은 부드럽고 마른 천 등으로 닦아 내십시오.

____ 본체 내부, USB 커넥터 삽입구에 물 등이 들어가지 않도록 주의하십시오.

보관 방법

본 제품은 다음의 조건을 만족한 환경에서 보관하십시오

보관 온도: -10°C~60°C

보관 습도: 20~85%RH

■세척과 보관 시의 주의

- 세척할 때 벤진, 시너 등을 사용하지 마십시오.
- 아래의 장소에는 보관하지 마십시오.
- -직사광선이 닿는 곳
- -고온, 다습, 물기 주변, 먼지가 많은 곳
- -진동이 많은 곳
- -화학 약품 보관 장소 및 부식성 가스가 발생하는 • 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때는 완전히 충전한 상태에서 가능한
- 한 상온(10~30°C)에서 보관하십시오.
- 3개월에 1번은 충전하십시오. 완전히 방전되면 충전할 수 없게 되는 경우가 있습니다.

<u> </u>	오래 사용하기 위해 제품 점검을!						
Š	이런 증상은 없습니까?	●충전 중, 동작 중에 이상한 소리・진동이 있다 ●본체가 매우 뜨겁다 ●본체가 변형되어 있거나 탄 냄새가 난다	•	사용 중지	사고 방지를 위해 제품의 전원을 끄거나 전용 USE 케이블을 뽑고, 반드시 판매점에 점검을 의뢰하십시오.		

20

덕합성평가 (저주파 마사지기) MSIP-REI-ECK-HCM-RP01 r자 및 설치자는 해당 무선설비가 전파혼신 가능성이있으므로

안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다

선인증번호: YU10444-17005 모델명: GSP031026 1ICP4/11/27 정격: 3.7 V, 40m Ah, 0.14 Wh 제품명: Rechargeable Li-ion Battery 전지

제조업체명: ZHUHAI GREAT POWER ENERGY CO., LTD. A/S: 1588-9514 제조국: Made in China 중국

www.elecom.co.kr

5F Suam Bldg. 1358-17, Seocho2-dong, Seocho-gu, Seoul 137-862, Korea TEL: 1588 - 9514

• 본 설명서의 저작권은 엘레컴 주식회사가 보유하고 있습니다.

· 본 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단으로 복제/전재하는 것을 금지합니다.

· 본 제품의 사양 및 외관은 제품의 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본 제품의 사용으로 인한 다른 기기의 고장 및 문제 발생 등은 책임을 지지 않으므로 양해를 부탁드립니다.

· 본 제품 가운데 전략 물자 또는 역무에 해당하는 제품을 수출할 때는 외환법에 따른 수출 또는 역무 거래 허가가 필요합니다.

· 그 밖의 본 설명서에 기재된 회사명 · 제품명 등은 일반적으로 각 업체의 상표 또는

등록 상표입니다.

Manual, Safety precautions, and Compliance with regulations 1st edition, October 26, 2017

ELECOM

©2017 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved

23 25