

한국에서만 사용 가능.

상기의 국가 이외에서 구매하신 고객은 반드시 구매 국가의 설명서 반영된 설명서를 참조하십시오.
www.elecom.co.jp/global/download-list/manual/

본 제품은 애플리어 린 HCT-P01 시리즈 및 애플리어 린 업 HCT-BTP01 시리즈 전용 젤패드입니다.
이 상품은 전기 자극을 신체에 전달하기 위해 부착하는 것입니다.
사용하기 전에 반드시 애플리어 린 HCT-P01 시리즈 또는 애플리어 린 업 HCT-BTP01 시리즈의 취급 설명서를 잘 읽은 후 올바르게 사용하십시오.

안전상의 주의(반드시 준수하십시오.)


사용하는 사람이나 타인에 대한 위해, 재산에 대한 손해를 미연에 방지하기 위해 반드시 지켜야 하는 점을 다음과 같이 설명합니다.
■ 표시 내용을 무시하고 잘못된 방법으로 사용했을 때 발생하는 손해의 정도를 다음 표시로 구분하여 설명합니다.

경고 '사망 또는 중상 등을 입을 가능성이 있는' 내용입니다.	주의 '상해를 입을 가능성 또는 물적 손상만 발생할 가능성이 있는' 내용입니다.
해서는 안 되는 '금지' 내용입니다.	반드시 실행해야 하는 '필수' 내용입니다.
경고	
트레이닝 이외의 목적으로 사용하지 마십시오. 사고나 트러블, 고장의 원인이 됩니다.	
아래의 부위에는 사용하지 마십시오. · 흉부 등의 심장 부근이나 머리 및 얼굴 등의 목 위쪽 부위 · 상처 부위, 눈, 입, 음부 등의 점막 부위 · 성형 수술한 부위 · 금속, 플라스틱, 실리콘 등이 이식되어 있는 부위 · 배꼽, 척추 · 문신(타투)을 한 부위 · 생리 중인 복부 · 목걸이 및 시계, 보드 피어싱을 한 부위	
젤패드 표면에 흙이 있거나 망가진 상태로 사용하지 마십시오. 사고나 트러블, 고장의 원인이 됩니다.	
본체와 젤패드를 연결·분리할 때, 젤패드를 붙이거나 위치를 바꿔 붙이거나 떼 때는 반드시 전원을 끄고 실시하십시오. 감전 및 고장의 원인이 됩니다.	
분해 및 수리, 개조하지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니다.	
본 제품은 1인용입니다. 여러 사람에게 사용하지 마십시오. 감전·사고의 원인이 됩니다.	

젤패드의 교환 방법


① 본체의 전원이 꺼져(LED 램프가 꺼져) 있는 것을 확인합니다.

② 본체를 젤패드에서 분리합니다. [코어 패드의 경우]

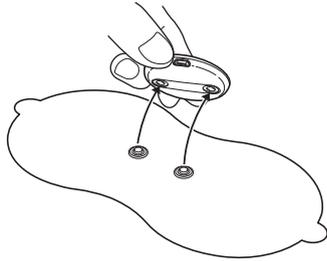

③ 젤패드를 봉투에서 꺼냅니다.
(젤패드에 붙어 있는 보호 필름은 아직 벗기지 마십시오.)

④ 본체와 젤패드의 연결 단자를 "딸깍"하는 소리가 날 때까지 연결합니다.

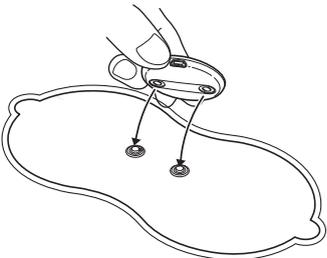

※트윈 패드도 같은 방법으로 교환하십시오.

주의

아래와 같은 곳에서는 사용하지거나 보관하지 마십시오. · 직사광선에 노출된 곳 · 난방 기구 주변 등 습도가 높은 곳 · 물가 · 먼지가 많은 곳 · 진동이 많은 곳 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.
젤패드를 장시간 피부에 붙인 채로 있지 마십시오. 피부 염증 등의 원인이 됩니다.
젤패드가 물에 젖은 상태로 사용하지 마십시오. 감전·사고의 원인이 됩니다.
젤패드를 2장 겹친 상태로 사용하지 마십시오. 감전·사고의 원인이 됩니다.
기기에 하중이 가해지는 자세 및 무리한 자세로 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
1일 1부위당 30분 이상 사용하지 마십시오. 사고나 컨디션 불량 등의 원인이 됩니다.
동시에 사용하는 경우에는 2부위까지도 하십시오. 사고나 컨디션 불량 등의 원인이 됩니다.
본체와 젤패드는 올바르게 연결되어 있는지 확인한 후 사용하십시오.
본 제품의 사용에 의해 강한 자극이나 피부에 습진, 발적, 가려움 등의 이상을 느꼈을 때는 즉시 사용을 중지하고 의사에게 상담하십시오. 사고나 컨디션 불량 등의 원인이 됩니다.
젖은 손으로 전용 USB 케이블 및 젤패드를 만지지 마십시오. 감전이나 고장, 사고의 원인이 됩니다.
유아의 손이 닿는 곳에 두거나 보관하지 마십시오. 사고의 원인이 됩니다. 만일 본체를 유아가 삼켰을 때는 즉시 의사에게 상담하십시오.
본 제품을 폐기할 때는 거주하는 지역의 지도에 따르십시오.

패키지 내용 확인

제품에 대한 안내는 판매점에 문의하십시오.

트윈 패드(2매입) 형번: HCT-BTP01G1-K 트윈 패드 (소모품) 보관용 시트  취급 설명서(본 설명서)	코어 패드(1매입) 형번: HCT-BTP01G2-K 코어 패드 (소모품) 보관용 시트  취급 설명서(본 설명서)
--	--

※본 제품은 의로기기가 아닙니다. 본 제품은 병의 유무를 판단할 수 없습니다.

취급·손질에 대해서

■ 젤패드 취급에 대해서

- 젤패드의 점착면을 만지지 마십시오.
- 젤패드는 구부리지 마십시오.
- 사용하지 않을 때는 보관용 시트 양면에 붙여 보관하십시오.
- 젤패드가 젖은 상태에서 사용하지 마십시오.
충분히 수분을 제거하고 점착면을 자연 건조시킨 후 사용하십시오.
- 직사광선이 닿지 않는 곳, 습기가 적은 곳에 보관하십시오.

■ 젤패드 손질하기(손질 기준: 30회 정도 사용할 때마다 1회)


본체에서 젤패드를 분리한 상태로 손질하십시오.

아래 경우에 젤패드를 손질하십시오.

- 젤패드가 잘 안 붙게 된 경우
- 사용 시의 자극이 약해진 경우
- 사용 시에 찌릿찌릿한 자극이 느껴지는 경우
- 젤패드가 오염된 경우
- 젤패드가 보관용 시트에 붙지 않을 때

손질해도 자극이 점점 약해지거나 찌릿찌릿한 느낌이 오는 경우는 젤패드를 교환하십시오.

① 소량의 물을 뿌리면서 손가락 끝으로 가볍게 몇 초간 씻습니다.
※ 물을 너무 많이 묻히지 마십시오. 점착력 저하나 점착면 손상의 원인이 됩니다.


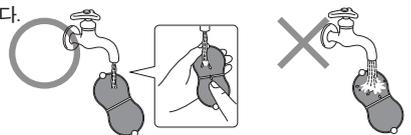


② 손잡이를 잡고 충분히 물기를 제거한 후 자연 건조시킵니다.

- ※ 충분히 건조되지 않으면 점착력이 약해집니다.
- ※ 휴지나 천 등으로 점착면을 닦지 마십시오.
- ※ 직사광선을 피하십시오.



겔패드 부착 예

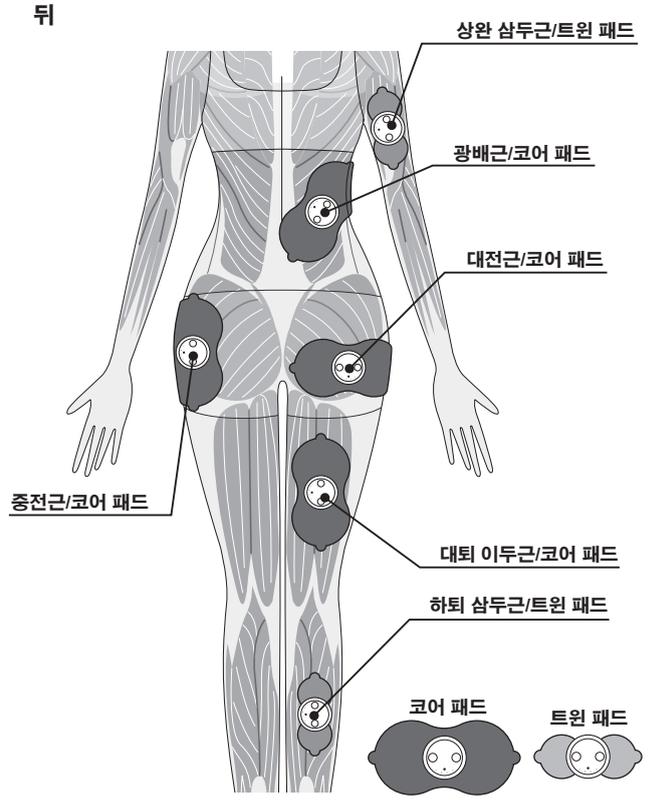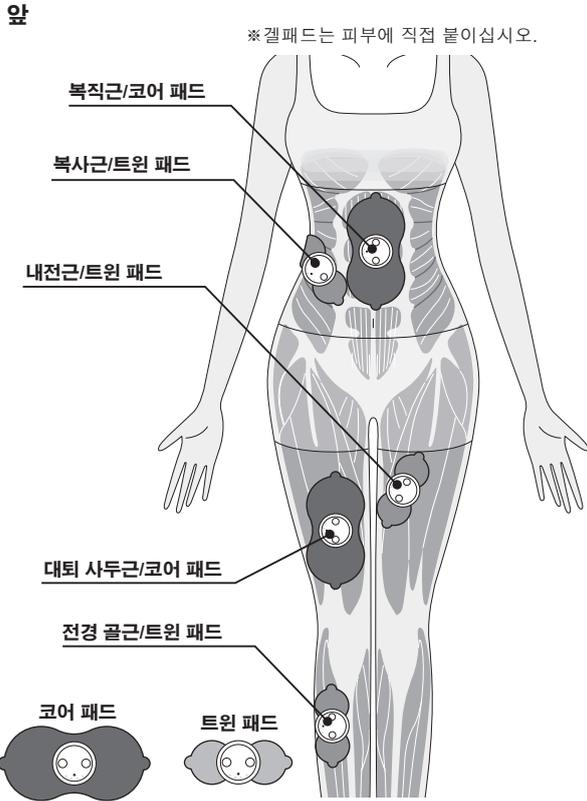

보관 방법

본 제품은 다음 조건을 충족하는 환경에서 보관하십시오.

보관 온도: -10℃~60℃

보관 습도: 20~85%RH

■ 손질과 보관 시의 주의 사항

- 손질 시에는 벤진이나 시너 등을 사용하지 마십시오.
- 아래와 같은 곳에는 보관하지 마십시오.
 - 직사광선에 노출된 곳
 - 고온, 다습, 물가, 먼지가 많은 곳
 - 진동이 많은 곳
 - 화학약품의 보관 장소나 부식성 가스가 발생하는 곳
- 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.



정격·사용

품명	에클리어 런 업/에클리어 런 전용 겔패드
대응 본체 형번	HCT-P01BU1-K, HCT-P01PN1-K, HCT-P01BU2-K, HCT-P01PN2-K, HCT-BTP01-K
치수	트윈 패드 약 W125 × H50mm × D5mm 코어 패드 약 W175 × H85mm × D5mm
중량	트윈 패드 약 5g(2매입) 코어 패드 약 12g(1매입) ※ 1매당 질량
사용 환경 온도	0℃ ~ 40℃ 20 ~ 85%RH
보관 환경 온도	-10℃ ~ 60℃ 20 ~ 85%RH

일본 외 구매 고객들은 문의 사항이 있을 경우 구매 국가의 대리점에 연락 하십시오. "ELECOM CO., LTD. (Japan)"은 일본 외 다른 국가에서의 구매 또는 사용에 대한 문의사항을 응대할 수 없습니다. 또한 일본어 외의 외국어 지원 서비스를 사용할 수 없습니다. 교환은 엘레컴 보증서의 명시에 따라 이루어지며, 일본 외 지역에 해당되지 않습니다.



적합성평가 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)
인증번호: R-C-ELJ-HCT-BTP01
제작자 및 설치자는 해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로
인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다

상품 관련 문의처

엘레컴코리아 콜 센터
TEL: 1588-9514 접수시간=10:00~17:00 ※점심 12:00~13:00 ※토요일, 일요일, 공휴일 휴무

교환·환불 안내

상품 구매 후에는 개봉 (BOX/포장)을 하시면 교환 및 환불이 불가합니다.
단, 정상적인 사용 상태에서 불량이나 결함이 발생 시 공정거래위원회 소비자 분쟁 해결 기준에 의해 처리됩니다.

ELECOM Korea Co., Ltd.
5F Suam Bldg. 1358-17, Seocho2-dong,
Seocho-gu, Seoul 137-862, Korea
TEL : 1588 - 9514
www.elecom.co.kr

Eclear lean UP Gel pad
Manual, Safety precautions, and Compliance with regulations
1st edition, October 19, 2018

ELECOM

©2018 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.