

본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 설명서에서는 조작 방법과 안전하게 취급하기 위한 주의 사항을 기재하고 있습니다. 사용하기 전에 이 취급 설명서를 반드시 읽으십시오. 또한 본 설명서를 모두 읽은 후에는 소중히 보관하십시오.

2017년 8월 작성(제1판)

## 본 제품에 대해

### ■EMS란

EMS(Electrical Muscle Stimulation)는 전기로 근육을 자극하여 기계적으로 근육을 움직여 운동 효과를 얻는 제품입니다.

### ■심층 주파수란

심층 주파수는 2000~5000Hz의 높은 주파수를 의미합니다. 주파수는 높으면 높을수록 지방이 두꺼운 부위의 지극이나 평소에도 잘 움직이지 않는 몸 안쪽의 근육을 움직일 수 있습니다.

### ■이완 주파수란

이완 주파수는 20~30Hz의 낮은 주파수를 의미합니다. 심층 주파수로 수축시킨 근육을 이완하면 근육의 피로 없이 오래 트레이닝할 수 있습니다.

### ■스트레칭

스트레칭으로 근육을 늘린 상태에서 본 제품을 사용하면 근육이나 평소 단련하기 어려운 힘줄의 트레이닝과 유연성을 향상시킬 수 있습니다.

### ■사용 시간 기준

1일 1부위당 약 30분 이내의 사용이 기준입니다. 장시간 계속 사용하면 몸 상태 불량에 원인이 될 수 있습니다.

본 제품은 트레이닝 시작 후 약 15분이 경과하면 자동으로 전원이 꺼지는 타이머를 내장하고 있습니다.

### ⚠ 주의:

격렬한 운동에는 사용하지 않습니다.  
 목의 수분으로 인해 피부가 염증을 일으키거나 겔 패드의 접착력이 떨어질 수 있습니다.

2

## 안전상의 주의 사항(반드시 지키십시오)

사용자 및 다른 사람에게 미칠 수 있는 위해 · 재산상의 손해를 미연에 방지하기 위해 반드시 지켜야 하는 사항을 다음과 같이 설명하고 있습니다.

■표시 내용을 무시하고 잘못 사용할 경우에 발생하는 위해 및 손해의 정도를 다음과 같은 표시로 구분하여 설명하고 있습니다.

	이 표시가 있는 항목은 '사망 또는 중상을 입을 가능성이 높음' 내용입니다.
	이 표시가 있는 항목은 '사망 또는 중상 등을 입을 가능성이 예상되는' 내용입니다.
	이 표시가 있는 항목은 '상해를 입을 가능성 또는 물적 손해만 발생할 가능성이 예상되는' 내용입니다.

### ⚠ 위험

- 아래와 같은 의약품 기기와 절대로 함께 사용하지 않습니다.
  - 심박 조율기 등의 체내 이식형 전자 기기
  - 인공 심폐 등의 생명 유지용 의약품 전자 기기
  - 심전계 등의 부착형 의약품 전자 기기
 이러한 의약품 기기의 오동작을 초래하여 생명이 현저한 장애를 일으키는 원인이 됩니다.

### ⚠ 경고

- 아래와 같은 분은 사용하지 않습니다.
  - 정맥, 동맥에 혈관이 있는 분
  - 의사가 운동을 금지한 분
  - 임신 중 또는 임신 중일 가능성이 있는 분
  - 스테로이드계 호르몬제의 장기 사용이나 간 기능 장애로 모세 혈관 확장증이 있는 분
- 아래와 같은 경우는 사용하지 않습니다.
  - 사용 중에 패드 주변에 급격한 통증을 느꼈을 때
  - 음주, 흡연 중
  - 피로가 심할 때
  - 취침 시, 목욕 시

3

	아래의 부위에는 사용하지 않습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>· 흉부 등의 심장 부근이나 머리 및 얼굴 등의 목 위쪽 부위</li> <li>· 상처 부위, 눈, 입, 음부 등의 점막 부위</li> <li>· 성형 수술한 부위</li> <li>· 금속, 플라스틱, 실리콘 등이 이식되어 있는 부위</li> <li>· 배골, 척추</li> <li>· 문신(타투)을 한 부위</li> <li>· 생리 중인 복부</li> <li>· 목결이 및 시계, 보디 피어싱을 한 부위</li> </ul>
	운동 이외의 목적으로 사용하지 않습니다. 사고 및 문제 발생의 원인이 됩니다.
	아이가 사용하지 않도록 하고, 기기 본체 및 겔 패드 위에서 놀게 하거나 올라가지 않도록 하십시오. 사고 및 부상의 원인이 됩니다.
	겔 패드에 손상이 없는지, 표면이 뜯어져 있거나 헐어 있지 않은지 점검한 후 사용하십시오. 사고 및 문제 발생, 고장의 원인이 됩니다.
	본체와 겔 패드를 연결 · 분리할 때, 겔 패드를 부착 · 교체 · 떼어 낼 때는 반드시 전원을 끈 후에 실시하십시오.
	의사의 치료를 받고 있을 때나 아래와 같은 분은 의사와 상담한 후에 사용하십시오. <ul style="list-style-type: none"> <li>· 의사의 치료를 받고 있는 분 또는 신체에 특이 이상을 느끼고 있는 분</li> <li>· 약성 중량이 있는 분</li> <li>· 심장 · 뇌 신경에 이상이 있는 분</li> <li>· 체온 38°C 이상(유열기)인 분</li> <li>※예1: 급성 발증 증상(권태감, 오한, 혈압 변동 등)이 강한 시기</li> <li>※예2: 쇠약해진 경우</li> <li>· 감염증 질환인 분</li> <li>· 피부 감각 장애 또는 피부에 이상이 있는 분</li> <li>· 척추의 골절, 염좌, 근육 파열 등 급성(동통성) 질환인 분</li> <li>· 안정이 필요한 분</li> <li>· 약을 복용 중인 분</li> <li>· 혈압에 이상이 있는 분</li> <li>· 사지가 불편한 분</li> <li>· 자신의 생각대로 조작할 수 없는 분</li> <li>· 당뇨병 등으로 인한 고도의 말초 순환 장애로 감각 장애가 있는 분</li> <li>· 저온 상태인 분</li> <li>· 혈행 장애가 있는 분</li> <li>· 겔 패드가 피부에 맞지 않는 분</li> <li>· 간질 증상이 있는 분</li> </ul> 사고 및 몸 상태 불량에 원인이 됩니다.

4

	분해 및 수리, 개조하지 않습니다. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
	본 제품은 1인용입니다. 여러 사람이 사용하지 않습니다. 감전 · 사고의 원인이 됩니다.
	아래의 장소에서는 사용하지 않습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>· 직사광선이 닿는 곳</li> <li>· 난방 기구 주변 등 습도가 높은 곳</li> <li>· 욕실 등 습기가 많은 곳</li> <li>· 물기 주변</li> <li>· 먼지가 많은 곳</li> <li>· 진동이 많은 곳</li> </ul> 화재, 감전, 장애의 원인이 됩니다.
	취침 시에는 사용하지 않습니다. 사고 및 부상의 원인이 됩니다.
	자전거 등의 운전 직전 및 운전 시에는 사용하지 않습니다. 사고 및 문제 발생의 원인이 됩니다.
	장시간 겔 패드를 피부에 붙인 상태로 두지 않습니다. 피부 염증 등의 원인이 됩니다.
	겔 패드가 물에 젖은 상태에서 사용하지 않습니다. 감전의 원인이 됩니다.
	1일 1부위당 30분 이상 사용하지 않습니다. 사고 및 몸 상태 불량에 원인이 됩니다.
	동시에 사용하는 경우에는 2부위까지로 하십시오. 사고 및 몸 상태 불량에 원인이 됩니다.
	본체와 겔 패드는 올바르게 확실하게 연결되어 있는 것을 확인한 후 사용하십시오.
	각 조작 버튼이 정상적으로 작동하는 것을 확인한 후 사용하십시오.

5

	처음 사용할 때나 장시간 사용하지 않은 기기를 사용할 때에는 취급 설명서대로 조작하여 정상적으로 작동하는 것을 확인한 후 사용하십시오.
	본 제품을 사용하여 강한 자극 및 피부에 습진, 발적, 가려움 등의 이상을 느꼈을 때는 즉시 사용을 중지하고 의사와 상담하십시오. 사고 및 몸 상태 불량에 원인이 됩니다.
	USB 커넥터 삽입구에 손이나 손가락 등 신체의 일부가 닿지 않도록 하십시오. 감전 · 장애 · 고장의 원인이 됩니다.
	USB 커넥터 삽입구에 금속류를 꽂지 않습니다. 발열 및 발화의 원인이 됩니다.
	케이블을 무리하게 당기거나 구부리거나 무거운 것을 올려 놓지 않습니다. 케이블이 손상되거나 단선되어 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
	전용 USB 케이블이 손상되어 USB 커넥터 삽입구가 느슨한 경우에는 사용하지 않습니다. 발화 및 감전의 원인이 됩니다.
	여행용 컨버터 등의 변압기를 사용하여 충전하지 않습니다. 발열 및 발화의 원인이 됩니다.
	시가 소켓 등을 사용하여 차량 내에서 충전하지 않습니다. 발화 및 발열, 감전의 원인이 됩니다.
	젖은 손으로 전용 USB 케이블 및 겔 패드를 만지지 않습니다. 감전 및 고장, 사고의 원인이 됩니다.
	함께 제공된 전용 USB 케이블은 본체의 충전 이외에는 사용하지 않습니다. 전용 USB 케이블은 통신 용도 및 그 밖의 기기 충전에는 사용할 수 없습니다.
	시판 중인 충전기나 AC 전원을 충전할 때는 반드시 사용하는 기기의 취급 설명서를 잘 읽고 안전상의 주의 사항에 따르십시오.
	충전 시 전용 USB 케이블은 끝까지 확실하게 삽입하십시오. 삽입이 불안정한 상태에서 충전하면 발화 및 감전의 원인이 됩니다.
	3개월에 1번은 반드시 충전하십시오. 완전히 방전되면 충전할 수 없게 되는 경우가 있습니다.

6

	기기에 고장이 발생했을 때는 사용을 즉시 중지하고, 전원을 끄십시오. 판매점 또는 인포메이션 센터에 연락하십시오.
	유아의 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 않습니다. 사고의 원인이 됩니다. 만일 본체를 유아가 삼켰을 때는 즉시 의사와 상담하십시오.
	본체를 물 및 액체에 넣거나 본체를 적시지 않습니다. 발열, 파열, 발화의 원인이 됩니다.
	본 제품을 폐기할 때는 거주하는 행정 기관의 지도에 따르십시오. 폐기할 때는 분해하지 않습니다.

7

## 패키지 내용 확인

사용하기 전에 패키지 구성품이 모두 갖추어져 있는지 확인하십시오. 또한 포장에는 안전을 기하고 있습니다만, 만일 부족품, 파손품 등이 있으면 바로 구입한 판매점 또는 엘레컴 종합 인포메이션 센터(☎P.27)에 연락해 주십시오.

### 스타터 세트 HCT-P01PN1/HCT-P01BU1

- 본체x1
- 코어 패드x1 (소모품)
- 부속품
  - 취급 설명서(본 설명서)x1
  - 스트레칭 매뉴얼x1
  - 보관용 시트x1
  - 수납 파우치x1
  - 전용 USB 케이블x1

### 풀 세트 HCT-P01PN2/HCT-P01BU2

- 본체x2
- 코어 패드x1 (소모품)
- 부속품
  - 취급 설명서(본 설명서)x1
  - 스트레칭 매뉴얼x1
  - 보관용 시트x1
  - 수납 파우치x1
  - 전용 USB 케이블x1

- 트윈 패드x2 (소모품)

8

### ■별매품

별매품 안내는 엘레컴 종합 인포메이션 센터(☎P.27)에 문의하십시오.

다음과 같은 별매품이 준비되어 있습니다.


### 트윈 패드(2매입) 형번: HCT-P01G1

- 트윈 패드x2 (소모품)
- 부속품
  - 취급 설명서(본 설명서)x1
  - 보관용 시트x1

### 코어 패드(1매입) 형번: HCT-P01G2

- 코어 패드x1 (소모품)
- 부속품
  - 취급 설명서(본 설명서)x1
  - 보관용 시트x1

9

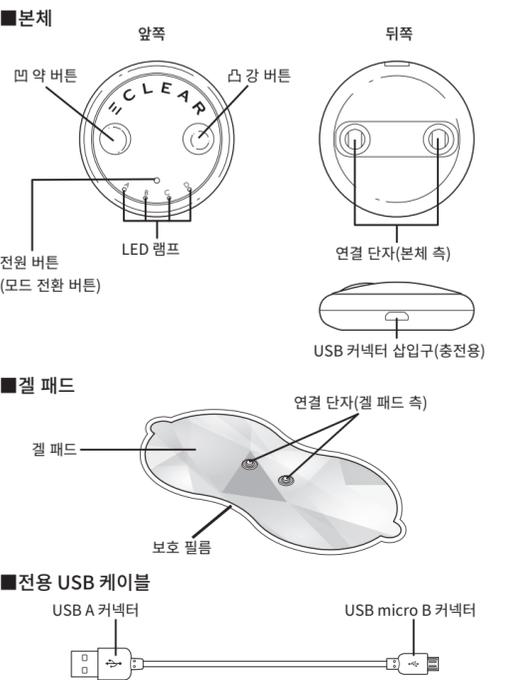


10

## 준비

사용 시작(구입 직후 및 장시간 사용하지 않았을 때) 및 사용 중에 배터리 잔량이 없을 때는 반드시 완전히 충전된 때까지 충전하십시오.

### 1 충전한다 충전 시간: 약 2.5시간

- ① 전용 USB 케이블의 USB micro B 커넥터를 본체의 USB 커넥터 삽입구에 연결합니다.
- ② 전용 USB 케이블의 USB A 커넥터를 PC, AC 충전기 등의 USB 포트에 연결하여 전원을 공급합니다.
- ③ 충전이 완료되면 "삐익" 소리가 납니다.

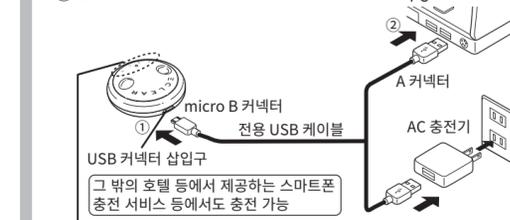

11

### ⚠ 주의:

- USB 5V 출력의 AC 충전기를 사용하십시오.
- 여행용 컨버터 등의 변압기를 사용하여 충전하면 발열 및 발화의 우려가 있습니다.
- 충전 중에는 조작할 수 없습니다.
- 모바일 배터리로는 충전할 수 없는 경우가 있습니다.
- 본체를 반복 충전하면 완전히 충전되었을 때 사용할 수 있는 시간이 조금씩 짧아집니다. 극도로 짧아지면 배터리의 수명이 다 된 것입니다만, 배터리는 교환할 수 없습니다.

### 2 겔 패드를 본체에 장착한다

- ① 처음 사용할 때는 겔 패드를 봉지에서 꺼냅니다. (겔 패드에 붙어 있는 보호 필름은 아직 벗기지 않습니다.)
- ② 본체의 전원을 끄고, LED 램프가 꺼져 있는 것을 확인합니다.
- ③ 본체와 겔 패드의 연결 단자를 "딸깍"하는 소리가 날 때까지 연결합니다.



### ⚠ 주의:

겔 패드는 당사가 지정된 겔 패드를 반드시 사용하십시오.

### ■겔 패드를 교환할 때는

- ① 본체를 겔 패드에서 분리합니다.
- ② 겔 패드를 봉지에서 꺼냅니다. (겔 패드에 붙어 있는 보호 필름은 아직 벗기지 않습니다.)
- ③ 본체의 전원이 꺼져(LED 램프가 꺼져) 있는 것을 확인합니다.
- ④ 본체와 겔 패드의 연결 단자를 "딸깍"하는 소리가 날 때까지 연결합니다.

12

## 겔 패드를 부착

### 1 보호 필름을 벗긴다

겔 패드의 보호 필름을 손잡이를 잡고 벗깁니다.

※2번째 이후에는 보관용 시트에서 분리하여 사용하십시오.



### 2 겔 패드를 부착한다

겔 패드를 사용하고자 하는 부위에 붙입니다. 겔 패드는 피부에 밀착시켜 붙이십시오. ※겔 패드가 피부에서 떨어지면 본체의 전원이 자동으로 꺼집니다.

### ⚠ 주의:

겔 패드를 목결이 및 복부의 피어싱 등 금속 위에 붙이지 않습니다.

### ■겔 패드 취급에 대해


- 겔 패드의 부착면은 만지지 않습니다. 접착력이 약해졌을 때는 '겔 패드 손질' (☎P.19)을 참조하십시오.
- 겔 패드는 구부리지 않습니다.

13

## 사용 방법

### 1 전원을 켜다

피부에 붙인 상태에서 전원 버튼을 약 2초간 길게 누르면 "삐익" 소리가 나면서 전원이 켜지고 트레이닝이 시작됩니다. LED 램프가 점등합니다.

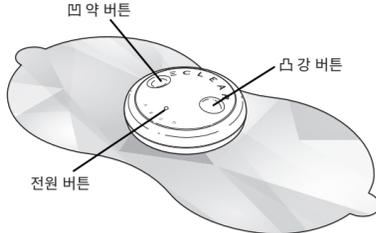

### 2 모드를 전환한다

동작 중에 전원 버튼을 누르면 모드를 전환할 수 있습니다. ※전원을 켜는 때는 항상 A 모드에서 시작합니다. • 전원을 누를 때마다 "삐" 소리가 나면서 모드가 전환됩니다. A 모드로 되돌아가면 "삐익" 소리가 납니다.

### 3 강도를 조정한다

15단계의 레벨 중에서 원하는 강도를 선택합니다. ※처음에 전원을 켜는 때 또는 모드를 변경했을 때의 강도는 레벨 "1"입니다. • 힝강 버튼을 누르면 "삐" 소리가 나면서 강도가 1단계 오릅니다. • 뒹약 버튼을 누르면 "삐빅" 소리가 나면서 강도가 1단계 내려갑니다. • 레벨 "15"에서 힝강 버튼, 레벨 "1"에서 뒹약 버튼을 누른 경우에는 "삐빅빅" 소리가 나고 레벨은 변경되지 않습니다.

14

## 보관 방법

본 제품은 다음의 조건을 만족한 환경에서 보관하십시오.

보관 온도: -10°C ~ 60°C

보관 습도: 20 ~ 85%RH

### ■손질 및 보관 시의 주의 사항

• 손질할 때 벤진, 시너 등을 사용하지 않습니다.

• 아래의 장소에는 보관하지 않습니다.

— 직사광선이 닿는 곳

— 고온, 다습, 물기 주범, 먼지가 많은 곳


— 진동이 많은 곳

— 화학 약품 보관 장소 및 부식성 가스가 발생하는 곳

• 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

• 장시간 사용하지 않을 때는 완전히 충전한 상태에서 가능한 한 상온(10 ~ 30°C)에서 보관하십시오.

• 3개월에 1번은 충전하십시오. 완전히 방치하면 충전할 수 없게 되는 경우가 있습니다.

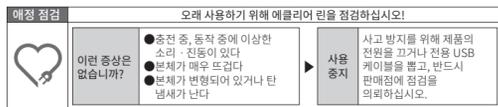

21

### 4 버저음을 전환한다


버저음의 ON/OFF를 전환할 수 있습니다.

• 뒹약 버튼과 전원 버튼을 동시에 약 1초간 길게 누르면 "삐삐" 소리가 나고, 이후의 조작음을 끌 수 있습니다.

• 힝강 버튼과 전원 버튼을 동시에 약 1초간 길게 누르면 "삐삐" 소리가 나고, 이후의 조작음이 납니다.

※안전을 위해 일부 동작은 음소거 모드에서도 소리가 나도록 설정되어 있습니다만, 고장이 아닙니다.

※의도하지 않은 조작으로 소리가 나지 않게 된 경우에는 힝강 버튼과 전원 버튼을 동시에 누르십시오.

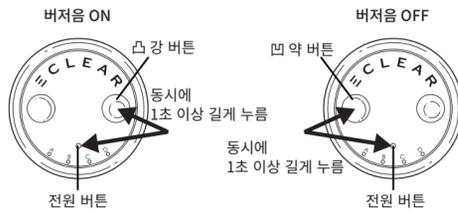

### 5 전원을 끈다

트레이닝 시작 후 약 15분이 경과하면 "삐익" 소리가 나면서 자동으로 전원이 꺼집니다.

※트레이닝 중에 전원을 끄려면 전원 버튼, 힝강 버튼, 뒹약 버튼 중 하나의 버튼을 약 2초 동안 길게 누릅니다.

※겔 패드가 피부에서 떨어지거나 겔 패드에서 본체를 분리한 경우에도 전원이 꺼집니다.

15

## 폐기할 때는

### ■리튬 이온 배터리 재활용에 대한 안내

본 제품은 리튬 이온 배터리를 내장하고 있습니다. 리튬 이온 배터리는 재활용할 수 있는 소중한 자원이므로 재활용에 협력해 주십시오. 본 제품을 폐기할 때는 거주하는 행정 기관의 지도에 따르십시오.

### Li-ion00

• 폐기할 때는 배터리를 분해하지 않습니다.

• 본 제품은 일반 가정 쓰레기로 폐기하지 않습니다. 폐기할 리튬 이온 배터리가 쓰레기 수거 차량 등에서 파괴되어 단락을 일으켜 발화, 발열의 원인이 됩니다.

### ■리튬 이온 배터리 분리 방법

제품을 폐기할 때 이외에는 절대로 분해하지 않습니다.

⚠ 경고 아래의 순서는 제품을 폐기하기 위한 것으로 수리용이 아닙니다. 직접 분해한 경우, 기능을 유지할 수 없으며 고장 또는 사고의 원인이 됩니다.

●충전 잔량이 있는 경우에는 배터리를 완전히 사용하십시오.

●드라이버를 이용하여 다음의 순서로 분해하십시오.


① 본체 전원 버튼 바로 아래 부근의 홈에 일자 드라이버를 끼워 연다

② 기판을 고정하고 있는 나사를 분리한다

③ 기판 뒤쪽에 있는 배터리의 코드를 니퍼로 마이너스의 검은색 코드에서 자른다.

④ 배터리를 분리한다

●분리한 배터리는 ⊕와 ⊖의 단자가 단락되지 않도록 주의하고, 단자부에 테이프를 붙여 절연하십시오.

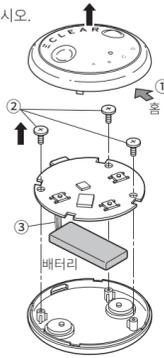

22

## 겔 패드 부착 예

본 제품은 4가지 모드가 있습니다. 부위별 및 지방의 두께에 따라 트레이닝에 적합한 모드와 부착 방법이 있습니다.

### ■피하 지방의 두께 기준

팔	복부	엉덩이
팔꿈치를 90도로 구부린 상태에서 가볍게 잡은 두께의 절반	복부에 힘을 준 상태에서 가볍게 잡은 두께의 절반	엉덩이에 힘을 준 상태에서 가볍게 잡은 두께의 절반

### ■모드

모드	피하 지방의 두께 (mm)	체형 기준		
		다소 굵음	보통	다소 얇음
A	25~	복부, 엉덩이	복부	
B	20~	팔, 등	엉덩이	복부
C	10~	허벅지	팔, 등	엉덩이
D	0~	종아리	종아리, 허벅지	팔, 등, 종아리, 허벅지

### ⚠ 주의:

동시에 사용하는 경우에는 2부위까지로 하십시오.


16

## 상황별 대처

상황	원인	대처 방법
전원이 켜지지 않는다	배터리의 충전이 불충분하거나 충전이 중지되어 있다 배터리 충전 중 겔 패드를 피부에 붙이지 않았다	전원을 끄고 충전하십시오. ▶P.11 배터리 충전이 완료된 후 전용 USB 케이블을 뺄고 사용하십시오. ▶P.11 겔 패드를 피부에 올바르게 부착한 후 전원을 켜십시오. ▶P.13
전원이 바로 꺼진다 사용 중에 전원이 꺼진다	배터리의 충전이 불충분하거나 충전이 중지되어 있다 본체와 겔 패드의 연결이 불충분 겔 패드와 피부가 올바르게 밀착되어 있지 않다	전원을 끄고 충전하십시오. ▶P.11 전원을 끄고 본체와 겔 패드를 다시 연결하십시오. ▶P.12 · P.13 전원을 끄고 피부에 밀착시키십시오. ▶P.13
충전할 수 없다	장기간 보관하여 배터리가 완전히 방전되었다	사용할 수 없습니다. 완전히 방전되지 않도록 3개월에 1번 충전하십시오. ▶P.21
겔 패드가 피부에 붙지 않는다	겔 패드 접착면의 투명한 보호 필름을 벗기지 않았다 겔 패드의 접착면이 더러워져 있다 물 세척 직후에 사용했다 겔 패드의 접착면이 손상되어 있다	접착면의 투명한 보호 필름을 벗기십시오. ▶P.13 소량의 흐르는 물을 묻히면서 손가락 끝으로 가볍게 몇 초간 씻으십시오. ▶P.20 충분히 물기를 제거한 후 접착면을 자연 건조시키십시오. ▶P.20 겔 패드는 소모 부품입니다. 접착면이 손상되었을 때는 사용을 중지하고 별매품을 구입하십시오. ▶P.9
겔 패드의 접착면이 벗겨진다, 어긋난다	겔 패드의 접착면에 염이나 수분이 많이 묻었다	겔 패드는 소모 부품입니다. 접착면이 손상되었을 때는 사용을 중지하고 별매품을 구입하십시오. ▶P.9
자극이 느껴지지 않는다/ 자극이 약하다	겔 패드가 피부에 밀착되어 있지 않다 겔 패드를 겹쳐서 붙였다 겔 패드의 접착면이 더러워져 있다 겔 패드를 올바르게 연결하지 않았다 강도 조절이 약해져 있다	피부에 밀착시키십시오. ▶P.13 겹치지 않도록 붙이십시오. ▶P.13 소량의 흐르는 물을 묻히면서 손가락 끝으로 가볍게 몇 초간 씻으십시오. ▶P.20 덜컹 소리가 나도록 올바르게 연결하십시오. ▶P.12 강도를 조절하십시오. ▶P.15
충전이 불충분하거나 배터리가 소모되어 있다	겔 패드의 접착면이 더러워져 있거나 손상되어 있다	충전하십시오. ▶P.11 겔 패드는 소모 부품입니다. 접착면이 손상되었을 때는 사용을 중지하고 별매품을 구입하십시오. ▶P.9
피부가 붙어진다/ 피부가 따끔하다	사용 시간이 너무 길다 겔 패드가 피부에 밀착되어 있지 않다 겔 패드의 접착면이 더러워져 있거나 말라 있다	1부위 30분 이내에 사용하고, 사용 후에는 겔 패드를 피부에서 떼어 내십시오. ▶P.15 피부에 밀착시키십시오. ▶P.13 소량의 흐르는 물을 묻히면서 손가락 끝으로 가볍게 몇 초간 씻으십시오. ▶P.20
소리가 나지 않는다	겔 패드의 접착면이 손상되어 있다	겔 패드는 소모 부품입니다. 접착면이 손상되었을 때는 사용을 중지하고 별매품을 구입하십시오. ▶P.9
	오조적으로 인해 음소거 상태로 되어 있다	강 버튼과 전원 버튼을 동시에 누르면 다시 소리를 낼 수 있습니다. ▶P.15


23

앞

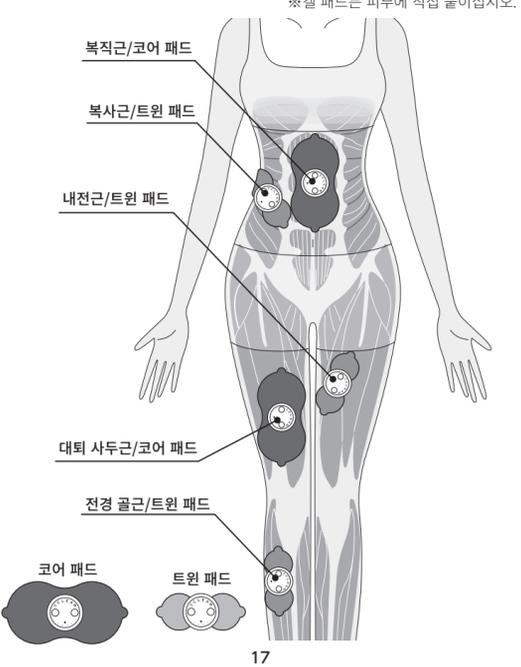

17

뒤

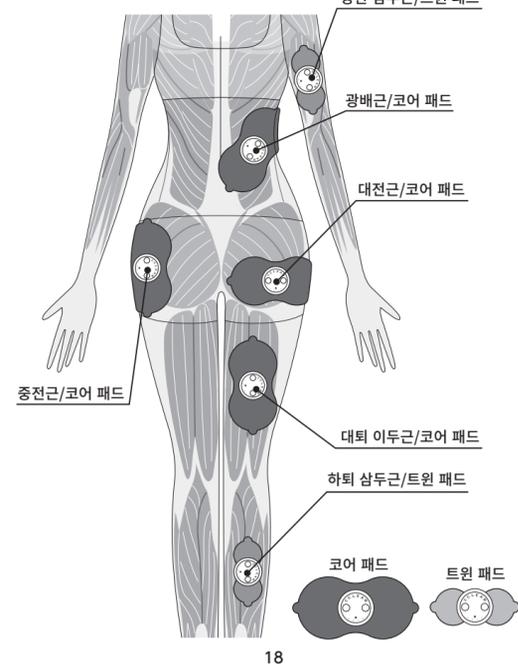

18

## 제품 사양

품명	에클리어 린
시리즈 형번	HCT-P01
전원 전압	DC 5.0V ± 5% (리튬 이온 배터리)
내장 배터리	75mAh ※ 1 ※ 2
반복 충전 횟수	약 500 회 ※ 1
충전 시간	약 2.5 시간 ※ 3
동작 시간	90 분 이상 (완전 충전 시) ※ 4
정격 출력 전압	약 42V
심층 주파수	약 2000 ~ 5000Hz
이완 주파수	약 20 ~ 30Hz
타이머	약 15 분
본체 치수	약 48mm x D16mm
본체 질량	약 20g
케이블 길이	약 0.2m
사용 환경 온습도	0° C ~ 40° C 20 ~ 85%RH
보관 환경 온습도	-10° C ~ 60° C 20 ~ 85%RH
제조국	중국

※1 JIS C 8711에 따르면

※2 과충전, 과방전, 과전압 보호 기능 탑재

※3 다 사용한 배터리를 완전히 충전할 경우의 기준

※4 동작 내용, 사용 환경에 따라 변화합니다.

25

## 사용 후에는

### 1 수납한다

① 전원이 꺼져 있는 것을 확인한 후 겔 패드를 피부에서 떼어 냅니다. 겔 패드 접착면을 만지지 말고, 손잡이를 잡고 떼어 냅니다.




② 본체와 겔 패드는 분리하지 말고, 보관용 시트에 붙입니다.

※2개가 들어 있는 경우에는 보관용 시트의 한쪽 면에 코어 패드 1매, 반대쪽 면에 트윈 패드 2매를 붙이십시오.



③ 함께 제공된 수납 파우치에 넣어 보관합니다.

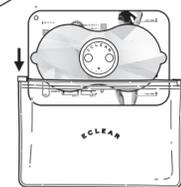

### ⚠ 주의:

온도 및 습도가 높은 곳이나 직사광선이 닿는 곳에 놓지 마십시오.

19

## 손질에 대해

본체에서 겔 패드를 분리한 상태에서 손질하십시오.

### ■겔 패드 손질

아래의 경우에 겔 패드를 손질하십시오.

• 겔 패드의 접착력이 약해졌을 때

• 사용 시의 자극이 약해졌을 때

• 사용 시에 따끔한 자극을 느낄 때

• 겔 패드가 더러워졌을 때

• 겔 패드가 보관용 시트에 붙지 않을 때

손질해도 자극이 약해졌거나 따끔한 느낌이 있는 경우에는 겔 패드를 교환하십시오.



① 소량의 물을 뿌리면서 손가락 끝으로 가볍게 몇 초간 씻습니다.

※물을 많이 뿌리지 마십시오. 접착력의 저하 및 접착면 손상의 원인이 됩니다.



② 손잡이를 잡고 충분히 물기를 제거한 후 자연 건조시킵니다.

※충분히 건조시키지 않은 경우, 접착력이 약해집니다.

※티슈 및 천 등으로 접착면을 닦지 마십시오.

※직사광선은 피하십시오.



### ■본체 손질

• 본체의 더러운 부분은 마르고 부드러운 천으로 닦아 내십시오.

### ⚠ 주의:

본체 내부, USB 커넥터 삽입구에 물 등이 들어가지 않도록 주의하십시오.

20

일본 외 구매 고객들은 문의 사항이 있을 경우 구매 국가의 대리점에 연락하십시오. "ELECOM CO., LTD. (Japan)"은 일본 외 다른 국가에서의 구매 또는 사용에 대한 문의사항을 응대할 수 없습니다. 또한 일본어 외의 외국어 지원 서비스를 사용할 수 없습니다. 교환은 엘렉트 보충서의 명시에 따라 이루어지며, 일본 외 지역에 해당되지 않습니다.

Eclair lean  
EMS HCT-P01 시리즈  
취급설명서  
2017년 8월 작성 제1판  
ELECOM CO., LTD

• 본 설명서의 저작권은 엘렉트 주식회사가 보유하고 있습니다.  
• 본 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단으로 복제/전재하는 것을 금지합니다.  
• 본 설명서의 내용에 관한 의견, 질문이 있으면 엘렉트 종합 인포메이션 센터로 연락하십시오.  
• 본 제품의 사양 및 외관은 제품의 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
• 본 제품의 사용에 관한 다른 기기의 고장 및 문제 발생 등은 책임을 지지 않으므로 양해를 부탁드립니다.  
• 본 제품 가운데 전락 물자 또는 역무에 해당하는 제품을 수출할 때는 외환법에 따른 수출 또는 역무 거래 허가가 필요합니다.  
• 그 밖의 본 설명서에 기재된 회사명 · 제품명 등은 일반적으로 각 업체의 상표 또는 등록상표입니다.

©2017 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.  
MSC-HCT-P01\_IP\_ko\_ver.1

27