

ELECOM
Healthcare


ECLAR
coro

에클리어 코롤

전기 마사지기 V01
첨부 문서
취급 설명서
HCM-V01R 시리즈

본 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
본 설명서에는 조작 방법 및 안전한 취급을 위한 주의 사항을 기재하였습니다.
사용 전에 이 취급 설명서를 반드시 읽으십시오.
또한, 본 설명서를 다 읽은 후에는 잘 보관하십시오.


일본에서만 사용 가능.
상기 국가 외에서 구매한 고작은 구입한 국가의 매뉴얼을 참조하십시오.
www.elecom.co.jp/global/download-list/manual/

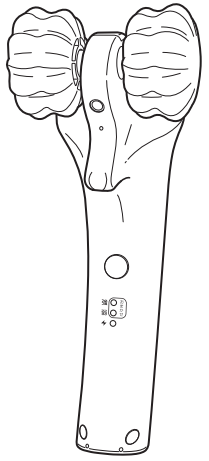

2018년 11월 작성(제1 판)

패키지 내용 확인

사용하기 전에 패키지 구성품이 모두 들어 있는지 확인하십시오. 또한, 포장에는 만전의 주의를 기울이고 있으나 만일 부족품이나 파손품이 있으면 즉시 구입한 판매점 또는 엘레컴 종합 인포메이션 센터(☎21 페이지)로 연락하십시오.

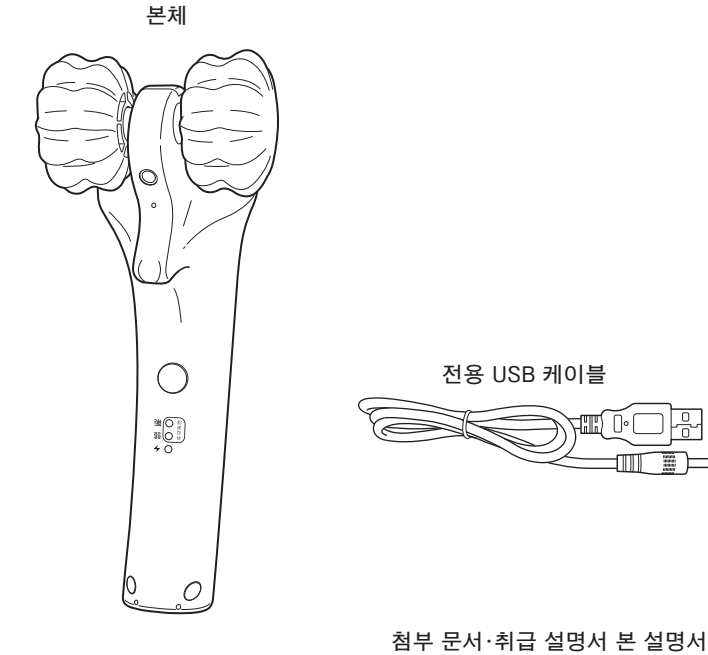


안전상의 주의(반드시 준수하십시오.)

사용하는 사람이나 타인에 대한 위해 및 재산에 대한 손해를 미연에 방지하기 위해 반드시 지켜야 하는 점을 다음과 같이 설명합니다.
■표시 내용을 무시하고 잘못된 방법으로 사용했을 때 발생하는 손해의 정도를 다음 표시로 구분하여 설명합니다.


	경고	이 표시가 있는 항목은 '사망 또는 중상' 등을 입을 가능성이 있는' 내용입니다.
	주의	이 표시가 있는 항목은 '상해'를 입을 가능성 또는 물적 손상만 발생할 가능성이 있는' 내용입니다.
		이 그림 표시는 해서는 안 되는 '금지' 내용입니다.
		이 그림 표시는 반드시 실행해야 하는 '강제' 내용입니다.

	경고
	다음과 같은 사람은 의사와 상담 후에 사용하십시오. - 심장 박동 조율기 등 전자파 장애의 영향을 받기 쉬운 체내 이식형 의료용 전기 기기를 사용하는 사람 - 의사의 치료를 받는 중인 사람이나 특히 신체에 이상을 느끼는 사람 - 악성 종양이 있는 사람 - 심장에 장애가 있는 사람 - 임신 중인 사람, 출산 직후인 사람 - 당뇨병 등에 의한 고도의 말초순환장애로 인한 지각장애가 있는 사람 - 피부에 상처가 있는 사람 - 안정이 필요한 사람 - 체온 38℃ 이상(유열기)인 사람 ※예1: 급성 염증 증상(피로, 오한, 혈압 변화 등)이 강한 시기 ※예2: 쇠약해진 경우 - 골다공증, 척추 골절, 염좌, 근육 파열 등 급성(동통성) 질환이 있는 사람 - 척추에 이상이 있는 사람 또는 척추가 좌우로 휜 사람 - 추간판탈출증이 있는 사람 - 그 밖에 몸에 특이한 이상을 느낄 때나 의료 기관에서 치료중인 사람 - 한동안 사용해도 효과가 나타나지 않는 사람 - 사고나 컨디션 난조의 원인이 됩니다.

각 부품의 이름

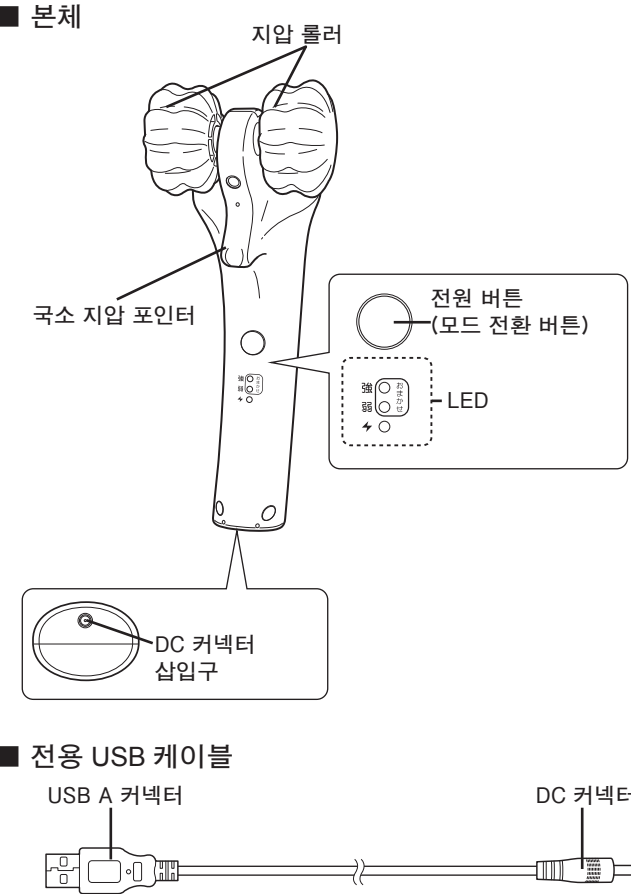

전용 USB 케이블

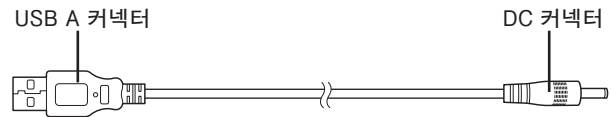

	경고
	다음과 같은 사람은 사용하지 마십시오. - 의사가 마사지를 금지한 사람 ※예: 혈전(색전)증, 심한 동맥류, 급성 정맥류, 각종 피부염, 피부 감염증(피하 조직의 염증을 포함) 등 증상을 악화시키는 원인이 됩니다.
	마사지 이외의 목적으로 사용하지 마십시오. 또한, 머리, 얼굴, 가슴, 배, 뼈가 나온 부분(팔꿈치, 무릎 등), 음부에는 사용하지 마십시오. 사고나 부상의 원인이 됩니다.
	지압 롤러, 국소 지압 포인트를 과하게 강하게 누르면서 사용하지 마십시오. 사고나 부상의 원인이 됩니다.
	스스로 의사표시가 불가능한 사람, 스스로 조작이 불가능한 사람에게 사용하게 해서는 안됩니다. 아이가 사용하거나, 가지고 놀지 않도록 하십시오. 유아의 손이 닿는 곳에 두어서는 안되며 사용하거나 보관하지 마십시오. 사고나 부상, 고장의 원인이 됩니다. 만일 부품을 유아가 삼켰을 때는 즉시 의사에게 상담하십시오.
	본체 위에 서거나 앉거나 해서는 안됩니다. 사고나 부상, 고장의 원인이 됩니다.
	다른 치료기기와 동시에 사용하지 마십시오. 몸 상태가 안 좋아지거나 컨디션 난조의 원인이 됩니다.
	분해나 수리, 개조하지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니다.

	주의
	1일 사용 시간은 10분 이내입니다. 또한 한군데를 연속해서 사용할 때에는 3분을 넘기지 않도록 하십시오. 사고나 컨디션 난조의 원인이 됩니다.
	본 제품은 반드시 손으로 들고 사용하십시오. 사고나 부상, 고장의 원인이 됩니다.

준비

첫 사용(구입 직후 및 장시간 사용하지 않았거나)이거나 사용 중에 배터리 잔량이 없을 때에는 반드시 완충될 때까지 충전하십시오.

충전

충전 시간: 약 2시간

① 전용 USB 케이블의 DC 커넥터를 본체의 DC 커넥터의 삽입구에 연결합니다.

② 전용 USB 케이블의 USB A 커넥터를 다음 USB 포트에 연결하여 전원을 공급합니다.
※올바르게 연결되면 오른쪽 아래 그림과 같이 LED가 점멸합니다.

■ 본체 측

■ PC에 연결하는 경우
IEC60950 규격에 적합한 PC의 USB2.0, USB3.0 또는 USB3.1

■ USB 충전기에 연결하는 경우
USB 충전기 (형식: HCM-AC2A01)

LED
배터리의 잔량에 따라 LED의 색깔이 아래 그림과 같이 변화합니다.

[0~30%] 강 약 자동 LED 점등	[30~80%] 강 약 자동 LED 점등	○ 소등 ● 점멸 ● 점등
[80%~] 강 약 자동 LED 점등	[충전 완료] 강 약 자동 LED 점등	

	주의
	사용 중에 신체에 이상이 느껴지면 즉시 사용을 중단하고 의사에게 상담하십시오. 사고나 컨디션 난조의 원인이 됩니다.
	사용 후에는 전원 버튼으로 동작을 멈추십시오. 사고나 부상의 원인이 됩니다.
	고장이 발견되면 즉시 사용을 중지하고 전원을 끈 다음 판매점이나 인포메이션 센터로 연락하십시오. 사고나 부상의 원인이 됩니다.
	다음과 같은 경우에는 사용하지 마십시오. - 피로가 심할 때 - 술에 취했을 때 - 습진이 발전했을 때 컨디션 난조의 원인이 됩니다.
	식전 및 식후 1시간 동안은 사용하지 마십시오. 컨디션 난조의 원인이 됩니다.
	사용 중에 자면 안됩니다. 사고나 부상의 원인이 됩니다.
	온열 매트나 이불 속에서 사용하지 마십시오. 또한, 스토브 등 열기 근처에서 사용하거나 담배를 피우면서 사용하지 마십시오. 발화나 모터의 온도 상승, 화재의 원인이 됩니다.
	액세서리 등 딱딱한 물건을 몸에 걸친 채 사용하지 마십시오. 부상의 원인이 됩니다.
	떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오. 감전이나 부상, 고장의 원인이 됩니다.
	기기를 청소할 때에 시너, 벤진, 알코올, 뜨거운 물은 사용하지 않습니다. 변색, 변형의 원인이 됩니다.
	목욕탕 등 습도가 높은 곳 또는 수중에서는 사용하지 마십시오. 감전이나 고장, 발화의 원인이 됩니다.

	주의
	자동차, 오토바이, 자전거 등을 운전할 때에는 사용하지 마십시오. 고장이나 문제 발생의 원인이 됩니다.
	DC 커넥터 삽입구에 손이나 손가락 등 신체의 일부가 닿지 않도록 하십시오. 감전이나 고장의 원인이 됩니다.
	DC 커넥터 삽입구에 금속류를 삽입하지 마십시오. 발열이나 발화의 원인이 됩니다.
	전용 USB 케이블을 역자로 당기거나 굽히거나 케이블 위에 무거운 물건을 얹거나 하지 마십시오. 케이블이 손상되거나 단선되어 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
	전용 USB 케이블이 손상되었거나 DC 커넥터 삽입구가 헐거울 때에는 사용하지 마십시오. 발화나 감전의 원인이 됩니다.
	여행용 컨버터 등의 변압기를 사용하여 충전하지 마십시오. 발열이나 발화의 원인이 됩니다.
	시가 쇼켓 등을 사용하여 차량 내에서 충전하지 마십시오. 발화나 발열, 고장의 원인이 됩니다.
	젖은 손으로 케이블을 만지지 마십시오. 감전이나 고장, 사고의 원인이 됩니다.
	부속된 전용 USB 케이블은 본체를 충전하는 것 이외에는 사용하지 마십시오.
	본체가 젖은 상태에서 충전하지 마십시오. 발열이나 발화, 감전의 원인이 됩니다.
	전원 버튼이 정상적으로 작동하는지 확인한 다음 사용하십시오.
	처음 사용할 때나 장시간 사용하지 않은 기기를 사용할 때는 취급 설명서대로 조작하여 정상적이고 안전하게 작동하는지 확인한 다음 사용하십시오.
	사용 전에 본체에 균열이나 깨짐, 전원 버튼에 파손이 없는지 확인한 다음 사용하십시오. 방수 기능에도 영향을 미치며 감전이나 고장, 발화의 원인이 됩니다.

사용 방법

마사지를 할 부위 전체를 지압 롤러로 누르면서 문지릅니다.

마사지를 할 부위를 국소 지압 포인트로 누릅니다.

바이브레이터의 전원을 켜고 지압 롤러 또는 국소 지압 포인트로 마사지를 합니다.

① 전원 켜기
전원 버튼을 약 1초간 길게 누르면 전원이 켜지고 치료가 시작됩니다.
「약」 LED가 점등됩니다.

	주의
	충전할 때는 전용 USB 케이블은 끝까지 확실하게 꽂으십시오. 헐렁하게 꽂은 상태로 충전하면 발화나 감전의 원인이 됩니다.
	전용 USB 케이블을 본체에서 뺄 때는 코드를 잡지 말고 반드시 커넥터를 잡고 뺍으십시오. 이를 지키지 않으면 감전이나 단락, 고장의 원인이 됩니다.
	3개월에 한 번은 반드시 충전하십시오. 완전히 방전되면 충전이 안되는 경우가 있습니다.
	충전중에 정전이 되면 즉시 충전을 중단하십시오. 감전이나 고장, 사고의 원인이 됩니다.
	본 제품을 폐기할 때는 해당 지방자치단체의 규정에 따르십시오.
	사용 시에 취급 설명서를 꼼꼼히 읽은 다음 사용하십시오. 또한, 기기에 이상이 없는지 확인한 다음 사용하십시오.
	본체는 다음에 사용할 때 지장이 없도록 청소를 한 다음 습기가 적은 곳에 정리하여 보관하십시오.

본 제품에 대해서

■ 사용 목적 또는 효과

안마, 마사지 대응
피로 회복, 혈행 촉진, 근육 피로를 해소, 근육 뭉침을 풀어 줌
신경통, 근육통의 통증 완화
일반 가정에서 사용할 것

■ 치료 시간의 기준

치료 시간의 기준은 1일 약 10분입니다. 한군데에 3분 이상 연속해서 사용하면 컨디션 난조의 원인이 될 수 있습니다.
본 제품은 치료 시작부터 약 5분이 경과하면 자동으로 전원이 꺼지는 타이머가 내장되어 있습니다.

② 모드 전환

치료 중에 전원 버튼을 누르면 모드를 전환할 수 있습니다. 전원 버튼을 누를 때마다 다음과 같이 전환됩니다.
※전원을 켰을 때는 항상 '약' 모드로 시작합니다.

모드

강 약 → 강 → 자동

※'자동': 회전수가 불규칙하게 '약'에서 '강'으로 변화합니다.

③ 전원 끄기

치료 시작 후 약 5분이 경과하면 자동으로 전원이 꺼집니다. ※치료중에 전원을 끄려면 전원 버튼을 약 1초간 길게 누릅니다.

주의:

- 사용 시에 아프다고 느껴지면 타올 등으로 덮고 사용하십시오.
- 온도나 습도가 높은 곳이나 적사광선에 노출된 곳, 유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오.

■효과적인 치료 타이밍

목욕 후에 치료하면 효과적입니다. 몸이 따뜻한 상태이기 때문에 혈행 촉진 효과도 높아집니다.
본 제품은 JIS IPX6에 해당하는 방수가 되므로 젖은 몸에도 안심하고 사용할 수 있습니다.

