


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わったあとは、大切に保管してください。

日本国内専用です
If you made your purchase in another country, please refer to that country's manual.
www.elecom.co.jp/global/download-list/manual/

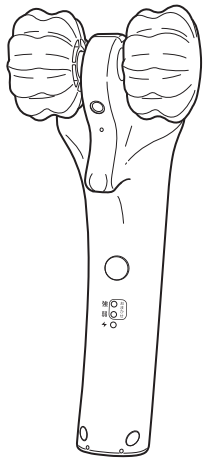

2018 年 11 月作成 (第 1 版)

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。


	警告	この表示がある項は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示がある項は、「傷害を負う可能性または物的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。
		この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
		この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

	警告	次の方は医師に相談のうえ使用してください。 - ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人 - 医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人 - 悪性腫瘍のある人 - 心臓に障害のある人 - 妊娠している人、出産直後の人 - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害からくる知覚障害のある人 - 皮膚に創傷のある人 - 安静を必要とする人 - 体温 38℃以上 (有熱期) の人 ※例 1：急性炎症症状 (倦怠感、悪寒、血圧変動など) の強い時期 ※例 2：衰弱している場合 - 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性 (疼痛性) 疾患の人 - 背骨に異常のある人又は背骨が左右に曲がっている人 - 椎間板ヘルニア症の人 - その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の - 人 - しばらく使用しても、効果が現れない人 事故や体調不良の原因となります。
--	-----------	--

2

各部の名称

■本体

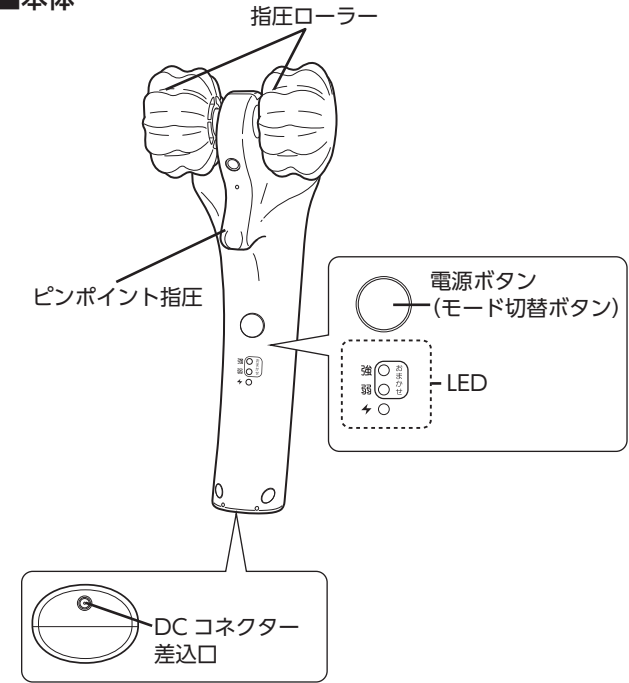

■専用 USB ケーブル



8

	警告	次の人は使用しないでください。 - 医師からマッサージを禁じられている人 ※例：血栓 (塞栓) 症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症 (皮下組織の炎症を含む。) など 症状を悪化させる原因となります。
		マッサージ以外の目的に使用しないでください。また、頭、顔、胸、腹、骨部 (ひじ、ひざなど)、陰部には使用しないでください。事故やケガの原因となります。
		指圧ローラー、ピンポイント指圧を過度に強く押しつけて使用しないでください。事故やケガの原因となります。
		自分で意思表示ができない人、自分で操作できない人に使わせしないでください。子供には使用させたり、遊ばせたりしないでください。幼児の手の届く範囲では使用せず、また置いたり、保管したりしないでください。事故やケガ、故障の原因となります。万一、部品を飲み込んだときは、直ちに医師に相談してください。
		本体の上に立ったり、座ったりして使用しないでください。事故やケガ、故障の原因となります。
		他の治療機器と同時に使用しないでください。気分が悪くなるなど、体調不良の原因となります。
		分解や修理、改造をしないでください。火災や感電の原因となります。

	注意	1 日の使用時間は、10 分以内にしてください。また、1 か所の連続使用は 3 分以内にしてください。事故や体調不良の原因となります。
		本品は必ず手に持って使用してください。事故やケガ、故障の原因となります。

3

準備

使いはじめ (購入直後や長時間使用しなかったとき) や使用中に電池残量がなくなったときは、必ず満充電になるまで充電してください。


充電する

- 専用 USB ケーブルの DC コネクターを、本体の DC コネクター差込口に接続します。
- 専用 USB ケーブルの USB A コネクターを、以下の USB ポートに接続し、電源を供給します。
※正しく接続されると、右下の図のように LED が点滅します。


■本体側



■PC に接続する場合
IEC60950規格適合のパソコンの USB2.0、USB3.0もしくは USB3.1

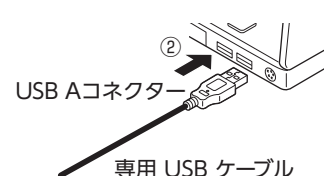

■USB 充電器に接続する場合
USB 充電器 (型式：HCM-AC2A01)

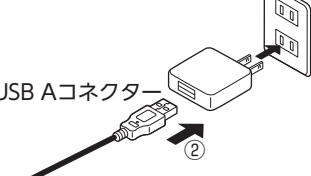

9

	注意	使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良の原因となります。
		使用後は、電源ボタンで動作を止めてください。事故やケガの原因となります。
		故障が見つかったら、すぐに使用を止め、電源を切って、販売店またはインフォメーションセンターに連絡してください。事故やケガの原因となります。
		次のようなときは使用しないでください。 - 疲労が激しいとき - 酒に酔っているとき - 湿疹が生じているとき 体調不良の原因となります。
		食前、食後の 1 時間は使用しないでください。体調不良の原因となります。
		使用中は眠らないでください。事故やケガの原因となります。
		こたつやふとんの中、毛布をかぶせて使用しないでください。また、ストーブなどの火気の近くで使用したり、タバコを吸いながら使用しないでください。発火やモーターの温度上昇、火災の原因となります。
		アクセサリなどの硬いものをつけて使用しないでください。ケガの原因となります。
		落としたり、強い衝撃をあてたりしないでください。感電やケガ、故障の原因となります。
		お手入れの際は、シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。変色、変形の原因となります。
		浴室など湿度の高いところ、また水中では使用しないでください。感電や故障、発火の原因となります。

4

充電時間：約 2 時間

- 充電が完了すると、LED が点滅から点灯に変わります。充電完了後は、安全のため上記②→①の順で専用 USB ケーブルを本体から外してください。1 回の充電で、約 3 時間使用できます。※動作内容、使用環境により変化します。

△注意：

- トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って充電すると、発熱や発火のおそれがあります。
- 本体の DC コネクター差し込み口が濡れている状態で、充電しないでください。
- 充電中は動作しません。
- 本体を繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。極度に短くなったら電池の寿命ですが、電池の交換はできません。

LED
充電電池の残量により、LEDの色が下の図のように変化します。

[0~30%] 強 弱 点滅 点灯	[30~80%] 強 弱 点滅 点灯	[80%~] 強 弱 点滅 点灯	[充電完了] 強 弱 点滅 点灯
○ 消灯	● 点滅	● 点灯	


10

	注意	自転車・バイク・自動車などの運転時には使用しないでください。事故やトラブルの原因となります。
		DC コネクター差込口に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電や故障の原因となります。
		DC コネクター差込口に金属類を差し込まないでください。発熱や発火の原因となります。
		専用 USB ケーブルを無理に引っ張ったり、曲げたり、ケーブルの上に重いものを乗せたりしないでください。ケーブルが傷ついたり断線したりし、火災や感電の原因となります。
		専用 USB ケーブルが傷んだり、DC コネクター差込口がゆるいときは使用しないでください。発火や感電の原因となります。
		トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って充電しないでください。発熱や発火の原因となります。
		シガーソケットなどを使って、車内で充電しないでください。発火や発熱、故障の原因となります。
		濡れた手でケーブルに触らないでください。感電や故障、事故の原因となります。
		付属の専用 USB ケーブルは本体の充電以外には使用しないでください。
		本体が濡れた状態で、充電しないでください。発熱や発火、感電の原因となります。
		電源ボタンが正常に動作することを確認してからご使用ください。
		はじめてご使用いただくときや、長時間使用しなかった機器をご使用いただくときには、取扱説明書のとおり操作を行い、正常に、かつ、安全に動作することを確認してからご使用ください。
		ご使用前に、本体に亀裂や割れ、電源ボタンの破れが無いことを確認してからご使用ください。防水性能にも影響があり、かつ、感電や故障、発火の原因となります。


5

使いかた

マッサージをする箇所全体を、指圧ローラーを押しながらおこなってください。

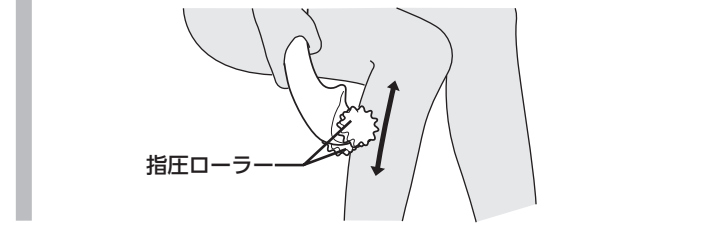


マッサージをする部位に、ピンポイント指圧を押す。

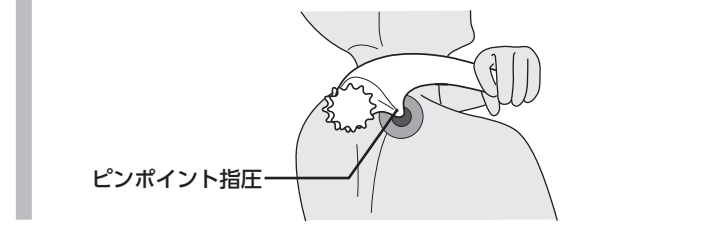

パイプレーターの電源を入れ、指圧ローラーまたはピンポイント指圧でマッサージをする。

- 電源を入れる。
電源ボタンを約 1 秒間長押しすると、電源が入り、治療が始まります。「弱」の LED が点灯します。

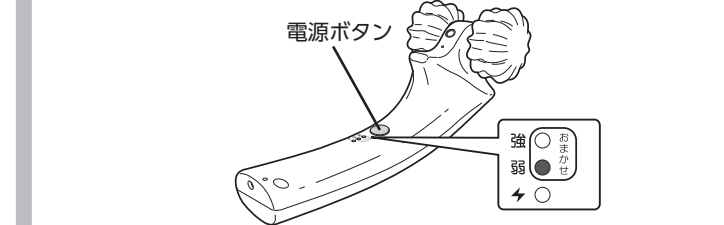

11

	注意	充電時、専用 USB ケーブルは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な状態で充電すると、発火や感電の原因となります。
		専用 USB ケーブルを本体から抜くときはコードを持たず、必ずコネクターを持って引き抜いてください。守らないと感電やショート、故障の原因となります。
		3 ケ月程度に一度は必ず充電してください。完全放電すると、充電できなくなる場合があります。
		充電中に停電のときは、直ちに充電を中止してください。感電や故障、事故の原因となります。
		本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。
		使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。
		本体は、次の使用に支障のないように清浄にし、湿気の少ないところに整理、保管してください。

本製品について

■使用目的または効果


あんま、マッサージの代用。
疲労回復 血行促進 筋肉の疲れをとる 筋肉のコリをほぐす
神経痛、筋肉痛の痛みの緩解
一般家庭で使用する。

■治療時間の目安


1 日、約 10 分が治療時間の目安です。1 か所につき 3 分以上連続で使用し続けると、体調不良の原因になることがあります。
本製品は、治療時間から約 5 分経過すると、自動的に電源が切れるタイマーを内蔵しています。

6

- モードを切り替える
治療中に電源ボタンを押すと、モードを切替えることができます。電源ボタンを押すたびに、下記のように切り替わります。
※電源を入れたときは、常に「弱」で開始します。

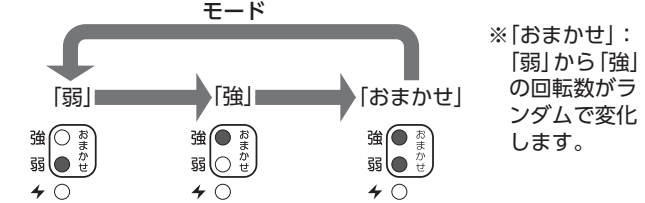

- 電源を切る。
治療開始から約 5 分経過すると、自動的に電源が切れます。
※治療中に電源を切るには、電源ボタンを約 1 秒間長押しします。

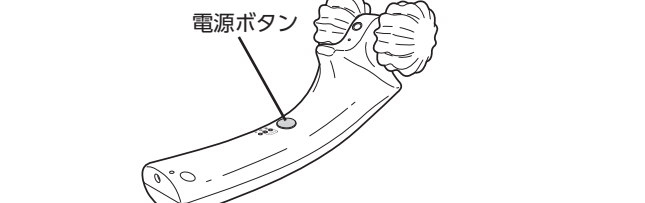

△注意：
・ご使用時に痛いと感じたらタオルなどをあててご使用ください。
・温度や湿度の高いところや、直射日光のあたるところ、幼児の手に届くところには置かないでください。

■効果的な治療タイミング

お風呂上がりや治療すると効果的です。身体が温まっているため、血行促進効果も高まります。
本製品は、JIS IPX6 相当の防水が施されており、濡れた身体でも安心してご使用いただけます。

12

7

